


Elettrodo di riferimento per ISE

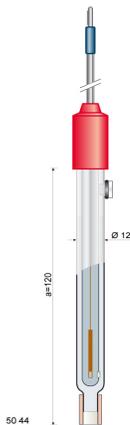

Descrizione

Elettrodo di riferimento completo

Viene fornito con acetato di litio come elettrolita nel ponte salino, essendo quello adeguato per lavorare con tutti gli elettrodi ISE Crison, senza necessità di essere sostituito.

Tra le sue caratteristiche, particolarmente rilevante è il diaframma ceramico removibile, che facilita la sostituzione dell'elettrolita. Possiede il connettore a banana da 4mm.

Specifiche

Temperatura di lavoro (°C)

0...80

Elemento di riferimento

Ag/AgCl incapsulato + ponte salino

Diaframma

Ceramico grande

Elettrolita

Acetato di Litio 0.1M

Materiale del corpo

Vetro

Connettore

Banana

Vedi anche

Codice Descrizione

52 43 Ricambio. Diaframma ceramico, per elettrodo 52 42 e 50 44.

99 01 Soluzione elettrolitica Acetato di Litio 0.1 M, bottiglia da 125 ml, per tutti gli ISE CRISON

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it