

Pompe chimiche anticorrosione Full Teflon®



N 820.3 FT.18

Pompe per vuoto Serie LABOPORT® per applicazioni chimiche aggressive

Caratteristiche tecniche

- Per trasportare, generare il vuoto e comprimere aria, gas e vapori, senza contaminazione di olio
- Elevate prestazioni e lunga durata, grazie alla membrana KNF a struttura differenziata
- Esenti da manutenzione
- Elevata tollerabilità ai vapori ed alla condensa
- Dotate di interruttore termico automatico e doppio fusibile
- Funzionamento silenzioso
- Disponibilità di accessori integrabili nel sistema: separatore in aspirazione, post condensatore, controllore digitale, basamento
- Ideali in laboratorio per applicazioni aggressive.
- Utilizzabili anche per evaporatori rotanti dove siano presenti solventi con un punto di ebollizione alto

Per applicazioni chimiche 8 mbar ass N 820.3 FT.18

Le pompe **N 820.3 FT.18** sono pompe bistadio resistenti agli attacchi corrosivi e quindi ideali per applicazioni aggressive nel laboratorio chimico.

Le pompe bistadio sono ideali per distillazione di solventi, anche alto bollenti.

Queste pompe chimiche sono dotate della membrana a struttura differenziata KNF, sviluppata e brevettata per ottimizzare gli sforzi della membrana stessa.

Grazie a questa tecnologia il risultato è una pompa di dimensioni ridotte e di lunga durata.

Materiali in contatto con il fluido

Modello	Testata	Membrana	Valvole
N 820.3 FT.18	PTFE	PTFE	FFPM

Dati tecnici


Portata (l/min)	20
Vuoto finale (mbar ass)	8
Max pressione (bar rel)	1
Portagomma (mm)	DI 10
Max temp. gas ed ambiente	+5...+40°C
Motore	230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 44
Potenza (P1)	120 W
Assorbimento di corrente	0,7 A
Peso (Kg)	9,3
Dimensioni LxHxW (mm)	312/207/154

N 820.3 FT.18 Accessori


Basamento
Bottiglia di Wouff
Condensatore
1° controllore
2° controllore

A richiesta motori con altre tensioni e frequenze

Dimensioni (mm) N 820.3 FT.18

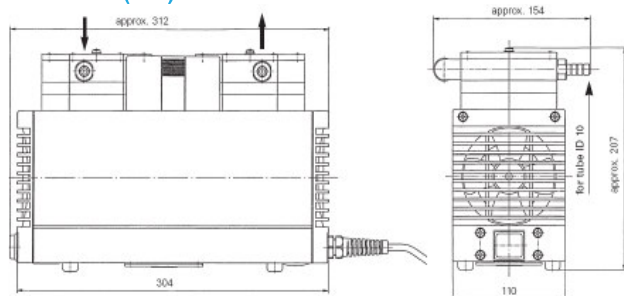

Curva caratteristica N 820.3 FT.18

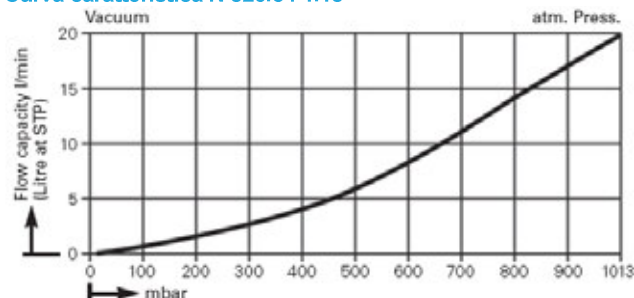

Accessori e ricambi

Descrizione	Specifiche	Codice di ordinazione
Kit ricambi	N 820.3 FT.18	057358

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova

Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143

Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it