

SystemSURE II™

ATP Hygiene Monitoring System

SYSTEM SURE II e SYSTEM SURE II PLUS

I bioluminometri sono strumenti che vengono impiegati in tutte quelle applicazioni di **monitoraggio dell'igiene delle superfici** ed impianti, necessarie in un'industria alimentare. Essi rilevano con estrema semplicità anche la presenza di residui alimentari, poiché misurano contemporaneamente l'ATP batterico e cellulare. Per ogni strumento sono impiegati i relativi **tamponi monouso** dotati dei necessari reagenti predosati. Per effettuare il test non è necessario personale qualificato o particolari attrezzature di laboratorio in quanto i pratici tamponi monouso rendono il sistema particolarmente semplice e veloce: la risposta viene visualizzata sul display in **15 secondi circa**.

BIOLUMINOMETRO SYSTEM SURE II e SYSTEM SURE II PLUS

Il bioluminometro System Sure II è uno strumento portatile, **di dimensioni e peso ridotti**. Funziona a batterie alcaline (2 comuni pile alcaline), ed è dotato di memoria attiva: permette l'incameramento di **500 misure**, che possono essere scaricate a computer tramite software e cavo di collegamento (compresi). Grazie alla **valigetta di trasporto in dotazione** è possibile portare lo strumento direttamente sul campo.

Appartiene ad una nuova generazione di bioluminometri. Piccolo, facile da usare, estremamente sensibile ed affidabile, e' utilizzato dai maggiori produttori di alimenti, e in tutte quelle aziende in cui e' necessario ottenere una **risposta immediata sullo stato igienico delle superfici e degli ambienti**. I reattivi predosati all'interno del tampone consentono di effettuare l'analisi senza l'utilizzo di pipette o ulteriori reagenti.



Caratteristiche tecniche SYSTEM SURE II:

Soglia di rilevazione: 1 femtomole di ATP
Impostazione fino a 100 programmi
500 risultati memorizzabili nel sistema
Software gratuito per salvataggio dei dati in windows excel
Lettura in 15 sec. Analisi completa in 20 sec.
Calibrazione automatica
Piu' di 3000 test con solo 2 batterie AA
Utilizzo di tamponi monouso predosati

Caratteristiche tecniche SYSTEM SURE II PLUS:

Impostazione: fino a 10 piani di campionamento
Impostazione: fino a 250 programmi per piano di campionamento
Memoria: 2000 risultati
Impostazioni ID utente
Scrittura alfanumerica
Software SURE TREND compreso nella fornitura




SystemSURE II™

ATP Hygiene Monitoring System

SOFTWARE SURE TREND

Software di archiviazione ed elaborazione dati che permette di gestire i dati provenienti dal Bioluminometro System Sure II plus. Caratteristiche:

- Impostazione di piani di campionamento.
- Infinite analisi statistiche: per es. Analisi dei risultati negativi o positivi rispetto al totale delle analisi effettuate oppure rispetto ad uno o più punti di campionamento, oppure considerando un periodo di tempo definito, ecc..
- Impostazione di una o più analisi statistica personalizzabile dall'utente.
- Gestione dei dati provenienti da più bioluminometri.

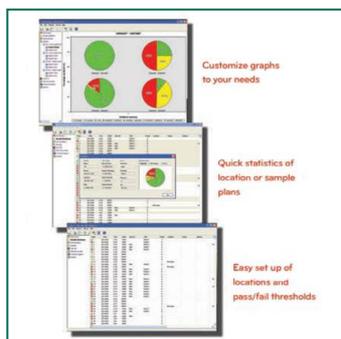

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it