



CONGELATORE BASE PORTA A VETRO BLFG 380



- **Struttura** : di tipo verticale, costruita in lamiera d'acciaio di colore bianco atossico con trattamento anti-corrosione all'esterno, interno in materiale plastico con vasca termoformata. Gli angoli della cella di stoccaggio sono arrotondati per facilitarne le operazioni di pulizia, il fondo è a vasca per contenerne eventuali liquidi
- **Isolamento** : in poliuretano espanso ad alta densità (40 Kg/m³) con uno spessore di 50 mm. Senza CFC e HCFC
- **Piedi/Rullini** : Nr 2 piedi, montati nella parte frontale, regolabili in altezza per facilitare le operazioni di livellamento e Nr 2 rullini montati nella parte posteriore, per facilitare le operazioni di movimentazione
- **Porta a vetro** : Nr 1 incernierata, realizzata con telaio perimetrale in alluminio verniciato di colore bianco, vetro temprato termoisolante a triplo cristallo, intercapedini sotto vuoto per aumentarne il coefficiente di isolamento, film riscaldante per prevenire appannamento e condensa sul vetro. La porta è dotata di guarnizione perimetrale, di tipo magnetico, a garanzia di una perfetta tenuta, montata ad incastro di facile sostituzione. Il profilo di battuta è riscaldato per evitare formazioni di ghiaccio sulla guarnizione stessa. La maniglia è ricavata ad incavo filo porta. La porta inoltre dispone di un meccanismo di chiusura con ritorno automatico a molla, blocco apertura ai 90°
- **Dotazione interna** : Nr 3 ripiani realizzati in filo d'acciaio plastificato atossico, regolabili in altezza in una serie di supporti ad altezze diversificate, ricavate nelle pareti interne
 - Dimensioni ripiano (L x P cm) : 49 x 33
 - Portata ripiano (Kg) : 25 (uniformemente distribuiti)
- **Illuminazione interna** : con tubo al neon, posizionata nella parte superiore della cella di stoccaggio, ad attivazione attraverso un apposito pulsante posto nel pannello di controllo
- **Pannello di controllo** : posizionato nella parte superiore della struttura (mascherina comandi), composto di interruttore ON/OFF, interruttore

illuminazione interna e teletermostato elettronico digitale con allarme incorporato

- Interruttore ON/OFF : interruttore generale dello strumento, selezionabile nelle 2 posizioni, retro-illuminato in posizione ON
- Interruttore illuminazione interna : attiva l'illuminazione interna, selezionabile nelle 2 posizioni
- Teletermostato elettronico digitale con allarme : funzionante a microprocessore con 4 pulsanti di controllo, sovrintende a tutte le funzioni del frigorifero (impostazione e mantenimento della temperatura impostata secondo le necessità di utilizzo, sbrinamenti, funzionamento del compressore e delle ventole). La temperatura interna è visualizzata attraverso un indicatore a led con illuminazione di colore rosso con una risoluzione di 0,1°C. Il teletermostato incorpora inoltre tra le proprie funzioni un allarme acustico (con buzzer) e visivo (con led nel display) segnalando variazioni di temperatura al di fuori del range programmato. L'allarme acustico può essere silenziato tramite un apposito pulsante
- **Unità refrigerante** : collocata nella parte inferiore della struttura, con unità condensatrice composta di 1 compressore ermetico e 1 condensatore alettato di tipo ventilato. Inoltre nella parte superiore della cella di stoccaggio è montato il pacchetto evaporante alettato, con tubazioni in rame e, a protezione dello stesso una copertura di plastica che incorpora il motoventilatore. Tutti i componenti montati sono di tipo industriale a garanzia della massima affidabilità
- **Gas refrigerante** : R404a senza CFC
- **Tipo di refrigerazione** : ventilata forzata, in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della cella di stoccaggio
- **Sbrinamento** : completamente automatico, con interventi pre-programmati dal teletermostato. L'acqua di derivazione è canalizzata e raccolta in una vaschetta riscaldata, posizionata nel vano motore, che consente l'evaporazione automatica della condensa
- **Temperatura** : regolabile nel range -5°C / -25°C
- **Voltaggio (V/ph/Hz)** : 230 / 1 / 50
- **Spina** : Schuko
- **Dispositivo di sicurezza** : Nr 2 fusibili cilindrici da 10A, a protezione dell'apparecchio

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it



CONGELATORE BASE PORTA A VETRO

BLFG 380

- Livello rumorosità (dB(A)) : ≤ 50
- Capacità lorda (litri) : 400
- Capacità netta (litri) : 380
- Dimensioni (L x P x H cm) : 60 x 62 x 187
- Peso netto (Kg) : 100
- Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 70 x 75 x 210 (1,11 m³)
- Peso lordo (Kg) : 120

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it



CONGELATORE BASE PORTA A VETRO

BLFG 380


ACCESSORI SU RICHIESTA



Chiusura di sicurezza con chiave



Registratore grafico di temperatura

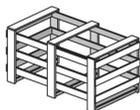

Imballo in gabbia di legno



* Le performance dichiarate sono riferite con temperature ambiente di +28°C, umidità relativa al 70% e senza massa termica interna (a vuoto).

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.