


CONTACOLONIE MANUALE COLONY STAR

Contacolonie manuale completo di supporto **luminoso reticolato**, **penna conta colpi** e **lente di ingrandimento**. Il sistema viene impiegato per agevolare la lettura delle colonie cresciute su terreno agarizzato. Il supporto è in plastica bianca, con un'area illuminata di diametro di 145 mm e reticolata con reticoli da 1 a 9 cm². Con questo sistema vengono lette piastre di diametro fino a 145 mm e per le più piccole può essere utilizzato un riduttore fornito in dotazione.

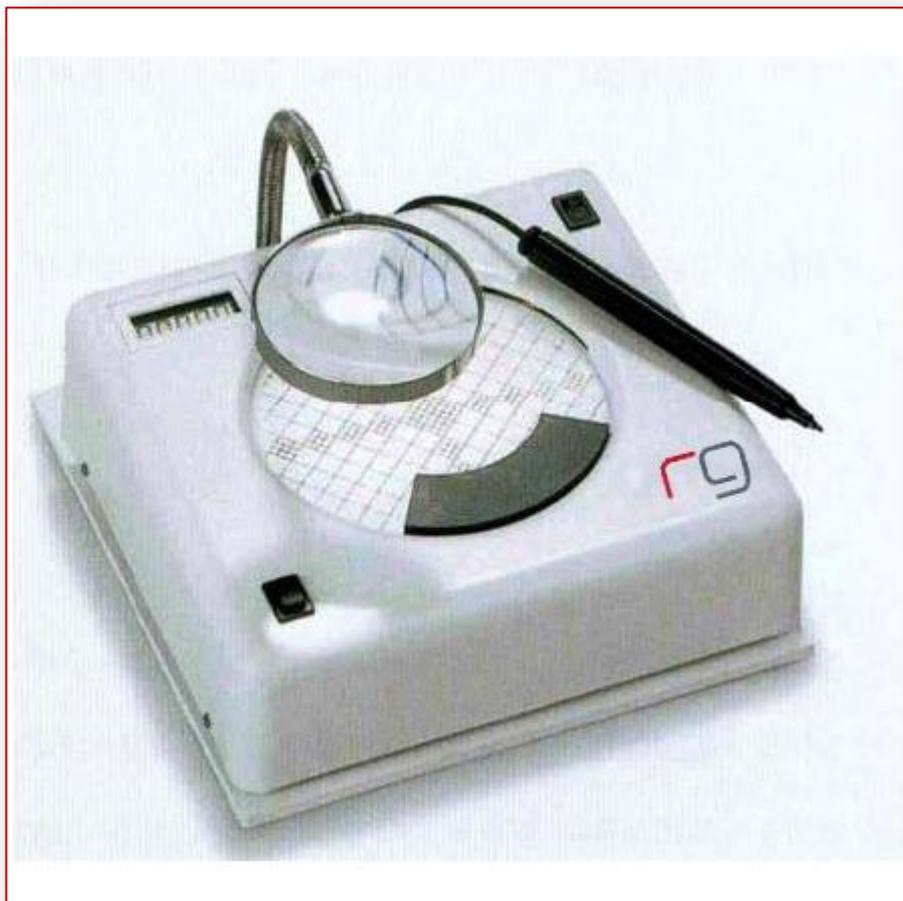

Alimentazione: 220 V – 50 Hz

Dimensioni: 250x230x75 mm

Peso: 1,7 Kg

Cod. 8500 Contacolonie manuale Colony Star

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova

Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143

Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it