


## Kit per la ricerca di neutralizzanti nel latte, siero e panna – Neutralizers Test

Il nuovo kit Neutralizers Test realizzato da Astori Tecnica permette la determinazione istantanea colorimetrica delle aggiunte di neutralizzanti e alcalinizzanti (come NaOH, KOH, carbonati, bicarbonati, calce, ammoniaca, ecc.) al latte, siero o panna. Tali sostanze proibite sono infatti addizionate in modo fraudolento al latte vecchio o mal conservato in modo da correggerne il pH e l'acidità verso valori ritenuti ottimali. Il test è semplicissimo e può essere eseguito ovunque, senza necessità di particolare attrezzatura: il campione è versato fino alla tacca superiore di una delle provette-test fornite, successivamente si aggiungono 2-3 gocce di un reagente specifico pronto all'uso. Una reazione colorimetrica immediata fornirà il risultato in maniera chiara ed inequivocabile.



### Caratteristiche tecniche:

- ✦ Semplice lettura visiva colorimetrica
- ✦ Test rapido: 2 facili passaggi e risultati in meno di un minuto
- ✦ Eseguibile ovunque, senza laboratorio
- ✦ Nessuna necessità di attrezzature o manualità particolari
- ✦ Rileva le aggiunte di tutti i neutralizzanti/alcalinizzanti
- ✦ Pratico formato da 50 test
- ✦ Basso costo/test
- ✦ Conservabile a temperatura ambiente per 12 mesi dalla data di produzione

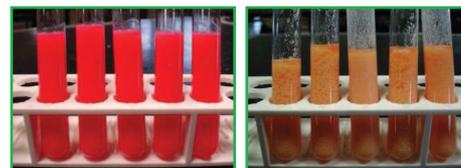

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab**

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: [www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - e-mail: [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)