

CHEMIPRO



Sicurezza attiva in un design moderno

La linea CHEMIPRO rappresenta il massimo livello di sicurezza e tecnologia per lo stoccaggio di acidi e basi in laboratorio.

Dotati di sistema di aspirazione e filtrazione integrato, questi armadi garantiscono un'aria costantemente pulita all'interno e nell'ambiente circostante, eliminando vapori corrosivi e mantenendo condizioni di lavoro sicure e controllate. La struttura in acciaio ad alta resistenza con rivestimenti interni in materiale anticorrosione assicura una durabilità eccezionale anche in presenza di sostanze altamente aggressive. Il sistema di ventilazione con filtri a lunga durata agisce costantemente nel flusso d'aria, riducendo al minimo la manutenzione e i costi operativi.

Ogni modello è equipaggiato con ripiani regolabili a vaschetta in materiale PLASCOAT® anticorrosione. Un design moderno e funzionale, abbinato a materiali di alta qualità, rende la linea CHEMIPRO la soluzione ideale per ambienti in cui sono richiesti standard di sicurezza, efficienza e affidabilità ai massimi livelli.

La linea CHEMIPRO si rivolge a laboratori chimici, centri di ricerca, industrie farmaceutiche e universitarie che necessitano di un sistema di stoccaggio ventilato di nuova generazione, conforme alle normative europee e progettato per un utilizzo intensivo e continuo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C
- Costruzioni di tipo «monolitico» con alla base piedini per la messa a livello degli armadi
- Porte tamburate e reversibili costruite con gli stessi materiali, complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature
- Elettroaspiratore marchio CE con cassa in tecnopolimero autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi
- Fusibili di protezione: 5x20 mm, flusso rapido 1A
- Portata aspiratore: max 325 mc/h.
- Alimentazione: 220/230 V-50 Hz monofase
- Maniglia a sinistra
- Assorbimento: 74 W
- Filtro carbone attivo montato in alto, adatto per sostanze acide, con prefiltro. Facile sostituzione del filtro dietro un pannello incernierato con serratura a chiave
- Maniglie con serratura e chiave
- Ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolabili in altezza
- Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare
- Segnali di sicurezza multilingue indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici per evidenziare i contenuti e i limiti di conservazione
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave
- Rispondenti alle normative EN61010-1, EN16121 e CEI 66-5

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**

CS103



CS104



CS106G




SMART CHOICE:

Con aspiratore e filtro incluso, porte piene e a vetro.
Risolgono il problema di stoccaggio di liquidi pericolosi.

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
CS103	CS 60 (1 PORTA)	600x600x1900 (1600+300)	550x550x1500	3 ripiani plastificati	75	80
CS103G	CS 60 (1 PORTA VETRO)	600x600x1900 (1600+300)	550x550x1500	3 ripiani plastificati	75	80
CS104	CS 60 A+B (2 PORTE / 2 SCOMPARTI)	600x600x1900 (1600+300)	550x550x1500	Scomparto superiore x acidi: 2 ripiani plastificati Scomparto inferiore x basi: 2 ripiani in acciaio inox	100	85
CS104G	CS 60A+B (2 PORTE VETRO / 2 SCOMPARTI)	600x600x1900 (1600+300)	550x550x1500	Scomparto superiore x acidi: 2 ripiani plastificati Scomparto inferiore x basi: 2 ripiani in acciaio inox	100	85
CS106	CS 120 (2 PORTE)	1140x600x1900 (1600+300)	1080x550x1500	3 ripiani plastificati	100	125
CS106G	CS 120 (2 PORTE VETRO)	1140x600x1900 (1600+300)	1080x550x1500	3 ripiani plastificati	100	125
CS106AB	CS 120 A+B (CON DIVISORIO, 2 PORTE)	1140x600x1900 (1600+300)	1080x550x1500	Scomparto x acidi: 3 ripiani plastificati Scomparto x basi: 3 ripiani in acciaio inox	100	125
CS106ABG	CS 120 A+B (CON DIVISORIO, 2 PORTE VETRO)	1140x600x1900 (1600+300)	1080x550x1500	Scomparto x acidi: 3 ripiani plastificati Scomparto x basi: 3 ripiani in acciaio inox	100	125

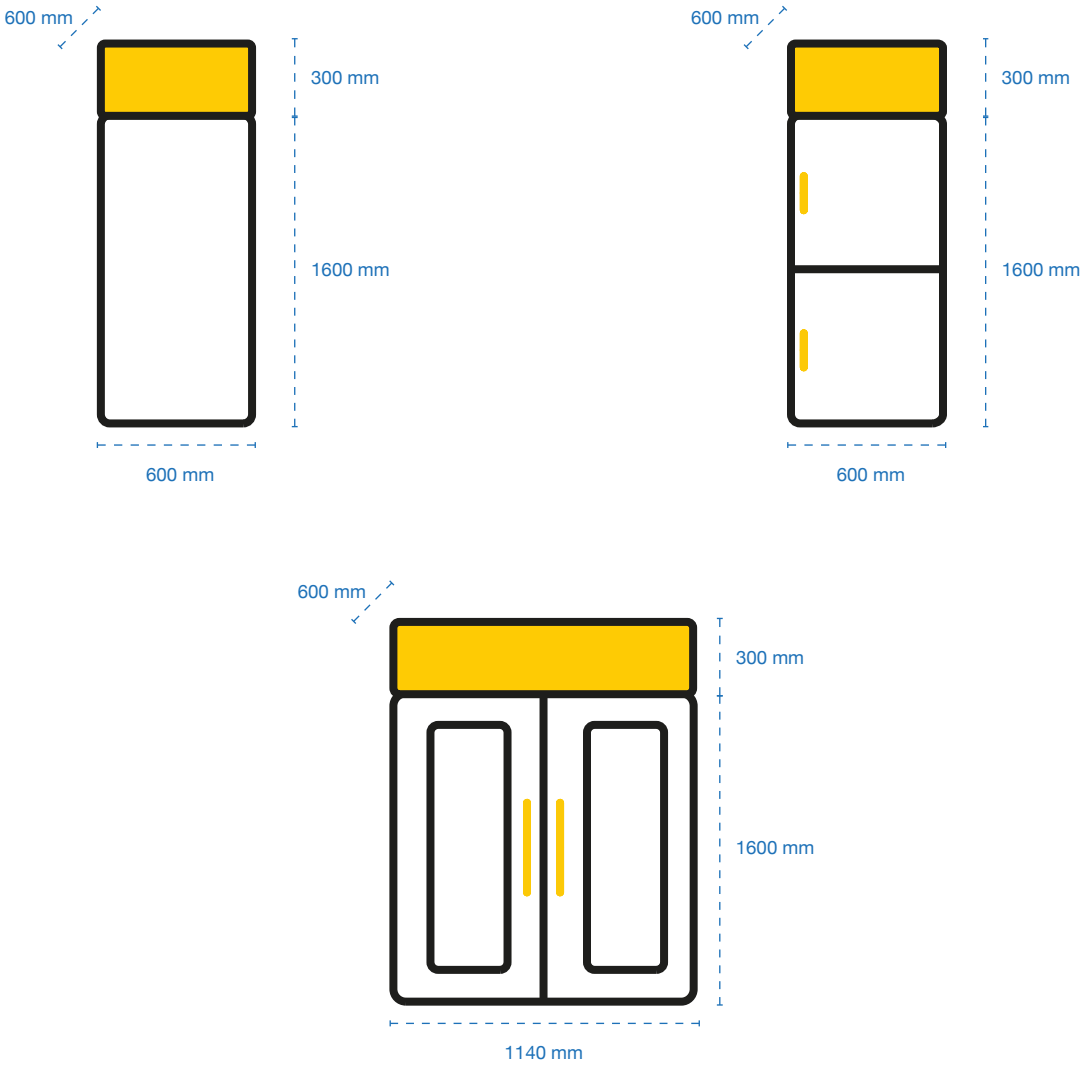

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)
RIPCS60	Ripiano in acciaio plastificato per armadio CS103, CS103G, CS104, CS104G, CS106AB, CS106ABG	485x545x30	7	35
RIPCS120	Ripiano in acciaio plastificato per armadio CS106, CS106G	1025x545x30	16	70
RIPX60	Ripiano in acciaio inox per armadio CS103, CS103G, CS104, CS104G, CS106AB, CS106ABG	485x545x30	7	35
RIPX120	Ripiano in acciaio inox per armadio CS106, CS106G	1025x545x30	16	70
RIP60SC	Telaio su guide per ripiano scorrevole (ripiano escluso), per armadio CS103, CS103G, CS104, CS104G, CS106AB, CS106ABG	-	-	-
RIPCS60SC	Ripiano scorrevole in acciaio plastificato per telaio RIP60SC	-	-	-
RIPXCS60SC	Ripiano scorrevole in acciaio inox per telaio RIP60SC	-	-	-
RIP120SC	Telaio su guide per ripiano scorrevole (ripiano escluso), per armadio CS106, CS106G	-	-	-
RIPCS120SC	Ripiano scorrevole in acciaio plastificato per telaio RIP120SC	-	-	-
RIPXCS120SC	Ripiano scorrevole in acciaio inox per telaio RIP120SC	-	-	-
RIP60PP	Ripiano in polipropilene da mettere all'interno del ripiano standard per armadio CS103, CS103G, CS104, CS104G, CS106AB, CS106ABG	485x545x60	7	35
RIP120PP	Ripiano in polipropilene da mettere all'interno del ripiano standard per armadio CS106, CS106G	1025x545x60	16	70
VACS60	Vasca di fondo in acciaio plastificato per armadio CS103, CS103G, CS104, CS104G, CS106AB, CS106ABG	485x545x60	15	35
VACS120	Vasca di fondo in acciaio plastificato per armadio CS106, CS106G	1025x545x60	33	70
VACS60X	Vasca di fondo in acciaio inox per armadio CS103, CS103G, CS104, CS104G, CS106AB, CS106ABG	485x545x60	15	35
VACS120X	Vasca di fondo in acciaio inox per armadio CS106, CS106G	1025x545x60	33	70
VA60PP	Vasca di fondo in polipropilene per armadio CS103, CS103G, CS104, CS104G, CS106AB, CS106ABG	485x545x60	15	35
VA120PP	Vasca di fondo in polipropilene per armadio CS106, CS106G	1025x545x60	33	70
ZOCPALCS60	Sistema zoccolo per armadio da 60	-	-	-
ZOCPALCS120	Sistema zoccolo per armadio da 120	-	-	-
SE1000	Serratura con codice digitale	-	-	-
TIM24	Timer giornaliero	-	-	-
ALLARME	Sistema di allarme porte aperte	-	-	-
ALL1250	Allarme porte aperte in presenza di CE1250	-	-	-

VENTILAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CE1250	Controller con display touch allarme, portata, velocità, stato filtri	-
CS0500M	Allarme elettronico mancanza aspirazione	-
GFKIT125	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 125mm e 2 morsetti)	Ø 125 mm L 1000 mm
RFCS60	Filtro per armadio da 60	290x235x16
RFCS120	Filtro per armadio da 120	580x235x16
RFCS60F	Filtro formalina per armadio da 60	290x235x16
RFCS120F	Filtro formalina per armadio da 120	580x235x16
LIN125	Motore di ricambio per sistema di aspirazione fino all'anno 2015	-
ACF125	Motore di ricambio per sistema di aspirazione dall'anno 2015	-

