


FORNO ZE



FORNO PER LABORATORIO

- Settore Laboratorio -

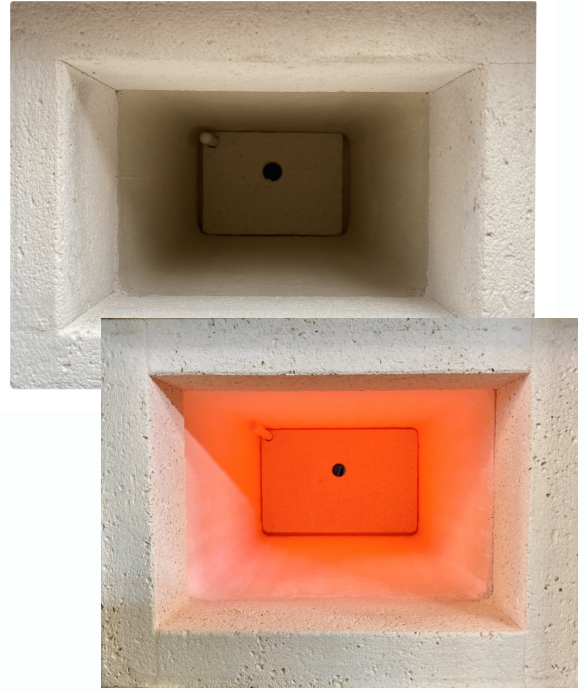

FORNO PER LABORATORIO

Il forno elettrico a muffola ZE, più compatto rispetto alla serie Z, è utilizzato nei laboratori, nello specifico di ricerca, scolastici, industriali e di analisi.

Il forno ZE è riscaldato su quattro lati da una muffola completa di resistenze per garantire la massima uniformità di temperatura. E' inoltre finemente verniciato e dispone di vari sistemi di sicurezza: microinterruttore e magnetotermico atti a proteggere l'operatore e l'impianto elettrico stesso.

Il forno è completo di termoregolatore digitale, di un gruppo statico e, su richiesta, di un programmatore di temperatura, timer giornaliero o settimanale, dal quale è possibile impostare accensione e spegnimento automatico.

FORNO ZE

SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI

MODELLO	TENSIONE MONOFASE	FREQUENZA	POTENZA	TEMPERATURA MASSIMA
ZE	v.110 – v.230	Hz. 50-60	2.3 kw	1100 C°

DIMENSIONI CAMERA INTERNA

MODELLO	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA
ZE	250 mm	145 mm	100 mm

DIMENSIONI DI INGOMBRO

MODELLO	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
ZE	580 mm	400 mm	540 mm	40 kg