




Serie SB

- La vasca è in acciaio INOX 18/8 stampate in un unico pezzo con relativo coperchio
- La custodia esterna è costruita in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida
- La coibentazione è costituita da fibra di vetro
- La pompa d'agitazione garantisce l'uniformità della temperatura all'interno della vasca
- Lo strumento è predisposto per il collegamento al set pompa, al set serpentina ad al set completo

N.B. con raffreddamento esterno i termostati possono lavorare da -10 a +150 °C

Dati tecnici		SB5	SB15	SB24
Capacità vasche	lt	5	12	18,5
Rubinetto di scarico		no	no	sì
Timer digitale	hh:mm	∞ o 99:59	∞ o 99:59	∞ o 99:59
Temperatura regolabile	°C	da +5 amb. a 150	da +5 amb. a 150	da +5 amb. a 150
Precisione con H ₂ O	°C	±0,5	±0,5	±0,5
Risoluzione display	°C	0.1	0.1	0.1
Portata pompa mbar 190	lt/min	9	9	9
Prevalenza mt. 1.8	lt/min	7,8	7,8	7,8
Potenza resistenza riscaldante	W	1300	1300	1300
Dimensioni interne sul fondo LxPxH	mm	250x100x150	290x255x150	440x560x200
Dimensioni utili in vasca LxPxH	mm	160x150x150	190x300x150	360x300x150
Dimensioni esterne LxPxH	mm	330x180x370	360x350x370	530x350x370
Peso	kg	7	8	11
Codice		612.1029.05	612.1029.15	612.1029.24


ACCESSORI

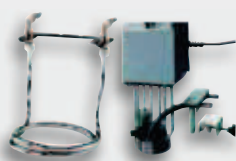

SET SERPENTINA*
Per lavorare fino a -10°C tramite un sistema di raffreddamento esterno

Codice

612.1029.01

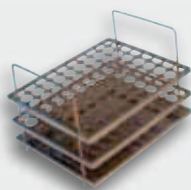

Portaprovette a tre piani in acciaio

	1 per vasca	1 per vasca	2 per vasca
	12 fori Ø21	48 fori Ø21	48 fori Ø21
Codice	212.1250.02	212.1250.05	212.1250.05
	20 fori Ø17	60 fori Ø17	60 fori Ø17
Codice	212.1250.03	212.1250.06	212.1250.06

SET POMPA**
Permette l'alimentazione esterna tramite un circuito chiuso

Codice

612.1029.02

SET COMPLETO
Set serpentina + set pompa

Codice

612.1029.03

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it