

Bagni ad immersione



FA 90 E
senza pompa



FA 90
con pompa

Serie FA 90 E/FA 90

La custodia esterna è costruita in acciaio INOX ed in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida. La pompa d'agitazione garantisce un'ottima uniformità della temperatura all'interno della vasca.

Il controllo della temperatura avviene tramite microprocessore ad azione PID e sonda PT100.

Lo strumento è dotato di un galleggiante di sicurezza che blocca la regolazione nel caso in cui il liquido sia troppo basso.

Tramite un raffreddamento esterno lo strumento può lavorare ad una temperatura di -10°C.

Dati tecnici		FA 90 E	FA 90
Classe di protezione	IP	30	30
Classe di sicurezza		3.1	3.1
Portata pompa mbar 190		-	9
Potenza riscaldante	W	1300	1300
Precisione	°C	± 3	± 0,5
Prevalenza mt 1,8		-	7,8
Temperatura	°C	da +30 a +120	da +5 amb. a +150
Timer digitale	hh:mm		∞ o 99:59
Temperatura impostabile	°C		-10 ÷ +150
Risoluzione display	°C		0.1
Altezza pompa immersa	mm		120
Dimensioni esterne LxPxH	mm	95x160x270	160x140x270
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Peso	kg	2,8	3
Codice		612.1029.50	612.1029.00

ACCESSORI



SET SERPENTINA*
Per lavorare fino a -10°C tramite un sistema di raffreddamento esterno

Codice

612.1029.01




**VASCA IN ACCIAIO INOX
CON PONTE**

Dimensione 330x180x180 - 5 lt

Codice

612.1029.26

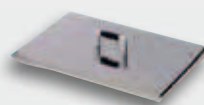


**COPERCHIO IN ACCIAIO INOX
CON MANIGLIA**

Per vasca da 5 lt

Codice

612.1029.27

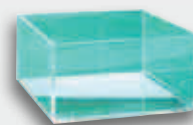

**VASCA IN PLEXIGLASS
TEMP. MAX DI UTILIZZO 60°C**

Dimensione 120x410x150 - 7 lt

Codice

612.1029.35

SET POMPA**
Permette l'alimentazione esterna tramite un circuito chiuso

Codice

612.1029.02

Dimensione 360x350x180
12 lt

Codice

612.1029.29

Per vasca da 12 lt

Codice

612.1029.30

Dimensione 300x330x150 - 12 lt

Codice

612.1029.37

SET COMPLETO
Set serpentina + set pompa

Codice

612.1029.03

Dimensione 530x350x150
18.5 lt

Codice

612.1029.32

Per vasca da 18.5 lt

Codice

612.1029.33

Dimensione 300x500x150 - 18,5 lt

Codice

612.1029.39