

UNDERBENCH



La nostra gamma di sotto cappe ottimizza lo spazio nel tuo laboratorio.
La soluzione personalizzata per sostituire i mobili da laboratorio in legno o acciaio con una combinazione di armadi di sicurezza per acidi, basi ed infiammabili.

COME SCEGLIERE LA COMBINAZIONE IDEALE?

- Misurare lo spazio disponibile nel sottocappa
- Se necessario, scegliere il basamento di appoggio adatto per lo spazio disponibile
- Scegliete i modelli di armadi per acidi/basi/infiammabili in base alle vostre esigenze di stoccaggio

OGNI ARMADIO DELLA GAMMA SOTTO CAPPA COMBISTORAGE PUÒ ESSERE COMBINATO SU BASAMENTI DI APPOGGIO CON DIVERSE LARGHEZZE

- Diverse larghezze e altezze dei nostri armadi vi permettono di trovare la soluzione ai problemi di stoccaggio nel vostro laboratorio
- Cerniere a destra / cerniere a sinistra / apertura cassettoni
- 13 larghezze possibili: da 400 a 1800 mm
- Basamenti di appoggio: H 70 mm
- Tutti i nostri modelli sono disponibili in 2 altezze 620 mm e 720 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico con uno spessore da 1 a 2 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli realizzati in HPL altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1 (nuova versione 2023)
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura è superiore ai 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- Cerniera in ottone anti-scintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di: messa a terra, vasca di fondo in acciaio verniciato, piedini regolabili di livellamento e porta con serratura a chiave
- Ripiani opzionali realizzati in acciaio verniciato o acciaio inox con altezza regolabile
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificato di resistenza al fuoco 90 minuti, come da norma EN14470-1 BV (Nuova versione 2023 Bureau Veritas)
- Certificato come conforme alla norma EN16121 BV (Bureau Veritas)

IN QUESTO MODO È POSSIBILE AVERE UNA COMBINAZIONE DI ACIDI + BASI + INFIAMMABILI SU UNA BASE UNICA.

CS714AS + CS715BD + CSF706DMY23




Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143

www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**

UNDERBENCH EN14470-1 e EN16121

CSF706CMY23

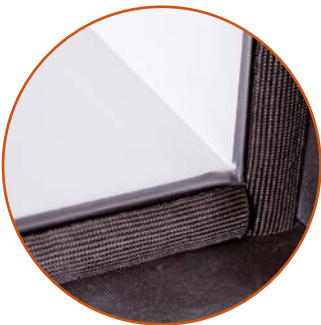

CSF611MY23




OPZIONI:

- 

COLORE
BIANCO
- 

CERNIERE
DX/SX
- 










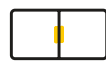
CASSETTONE
- 

2 PORTE
- 

2 ALTEZZE
(H620-H720)

SMART CHOICE:

Modulare e certificato.
La soluzione per conservare e utilizzare prodotti
pericolosi direttamente in laboratorio.

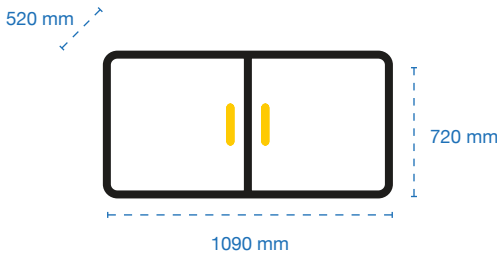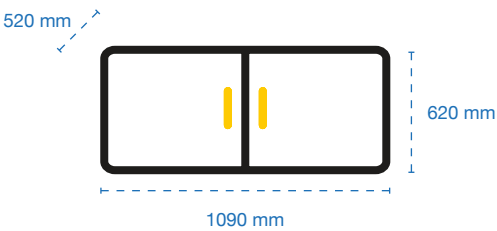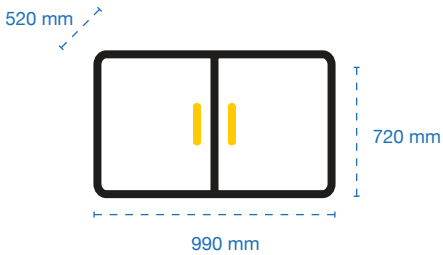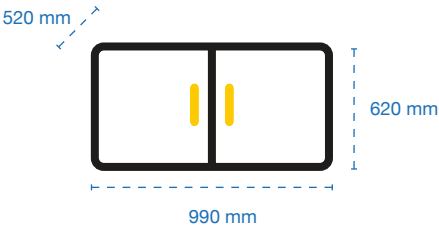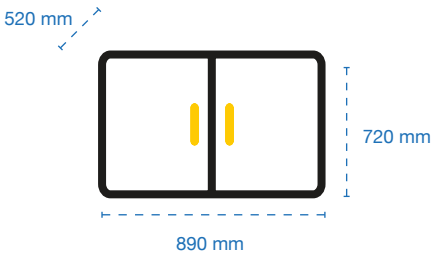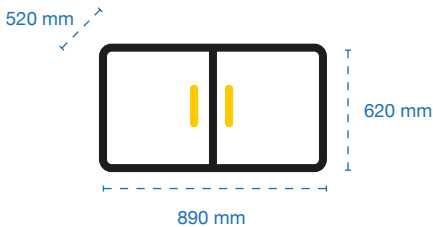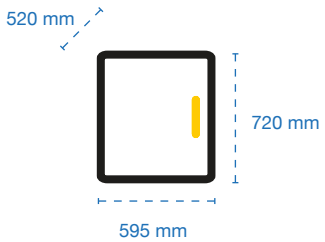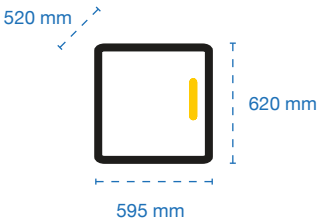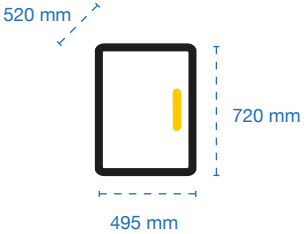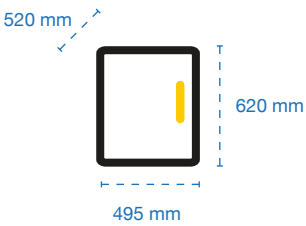

ARTICOLI

TIPO DI APERTURA	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
	CSF605DMY23	FIRE 50 UB H62	495x520x620	382x342x495	12	65
	CSF705DMY23	FIRE 50 UB H72	495x520x720	382x342x495	12	75
	CSF605SMY23	FIRE 50 UB H62	495x520x620	382x342x495	12	65
	CSF705SMY23	FIRE 50 UB H72	495x520x720	382x342x495	12	75
	CSF605CMY23	FIRE 50 UB H62	495x520x620	382x342x495	12	70
	CSF705CMY23	FIRE 50 UB H72	495x520x720	382x342x495	12	80
	CSF606DMY23	FIRE 60 UB H62	595x520x620	482x342x495	15	70
	CSF706DMY23	FIRE 60 UB H72	595x520x720	482x342x595	15	80
	CSF606SMY23	FIRE 60 UB H62	595x520x620	482x342x495	15	70
	CSF706SMY23	FIRE 60 UB H72	595x520x720	482x342x595	15	80
	CSF606CMY23	FIRE 60 UB H62	595x520x620	482x342x495	15	75
	CSF706CMY23	FIRE 60 UB H72	595x520x720	482x342x595	15	85

TIPO DI APERTURA	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
	CSF609MY23	FIRE 90 UB H62	890x520x620	777x342x495	25	105
	CSF709MY23	FIRE 90 UB H72	890x520x720	777x342x595	25	115
	CSF609CMY23	FIRE 90 UB H62	890x520x620	777x342x495	25	110
	CSF709CMY23	FIRE 90 UB H72	890x520x720	777x342x595	25	120
	CSF610MY23	FIRE 100 UB H62	990x520x620	877x342x495	27	115
	CSF710MY23	FIRE 100 UB H72	990x520x720	877x342x595	27	125
	CSF610CMY23	FIRE 100 UB H62	990x520x620	877x342x495	27	120
	CSF710CMY23	FIRE 100 UB H72	990x520x720	877x342x595	27	130
	CSF611MY23	FIRE 110 UB H62	1090x520x620	977x342x495	30	125
	CSF711MY23	FIRE 110 UB H72	1090x520x720	977x342x595	30	135
	CSF611CMY23	FIRE 110 UB H62	1090x520x620	977x342x495	30	130
	CSF711CMY23	FIRE 110 UB H72	1090x520x720	977x342x595	30	140

ACCESSORIO INCLUSO:
Ogni modello è completo di vasca di fondo in acciaio verniciato.

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
RIPF50V	Ripiano in acciaio verniciato per armadio FIRE 50 UB	380x320x39	4	12
RIPF60V	Ripiano in acciaio verniciato per armadio FIRE 60 UB	480x320x39	6	15
RIPF90V	Ripiano in acciaio verniciato per armadio FIRE 90 UB	775 x320x39	9	27
RIPF100V	Ripiano in acciaio verniciato per armadio FIRE 100 UB	875x320x39	11	28
RIPF110V	Ripiano in acciaio verniciato per armadio FIRE 110 UB	975x320x39	12	30
RIPF50I	Ripiano in acciaio inox per armadio FIRE 50 UB	380x320x39	4	12
RIPF60I	Ripiano in acciaio inox per armadio FIRE 60 UB	480x320x39	6	15
RIPF90I	Ripiano in acciaio inox per armadio FIRE 90 UB	775 x320x39	9	27
RIPF100I	Ripiano in acciaio inox per armadio FIRE 100 UB	875x320x39	11	28
RIPF110I	Ripiano in acciaio inox per armadio FIRE 110 UB	975x320x39	12	30
S50UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per armadio FIRE 50 UB (ripiano non incluso)	-	-	-
RIPF50VS	Ripiano scorrevole in acciaio verniciato per S50UBS	284x320x39	4	12
RIPF50IS	Ripiano scorrevole in acciaio inox per S50UBS	284x320x39	4	12
S60UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per armadio FIRE 60 UB (ripiano non incluso)	-	-	-
RIPF60VS	Ripiano scorrevole in acciaio verniciato per S60UBS	384x320x39	5	15
RIPF60IS	Ripiano scorrevole in acciaio inox per S60UBS	384x320x39	5	15
S90UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per armadio FIRE 90 UB (ripiano non incluso)	-	-	-
RIPF90VS	Ripiano scorrevole in acciaio verniciato per S90UBS	608x320x39	8	27
RIPF90IS	Ripiano scorrevole in acciaio inox per S90UBS	608x320x39	8	27
S100UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per armadio FIRE 100 UB (ripiano non incluso)	-	-	-
RIPF100VS	Ripiano scorrevole in acciaio verniciato per S100UBS	708x320x39	10	28
RIPF100IS	Ripiano scorrevole in acciaio inox per S100UBS	708x320x39	10	28
S110UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per armadio FIRE 110 UB (ripiano non incluso)	-	-	-
RIPF110VS	Ripiano scorrevole in acciaio verniciato per S110UBS	808x320x39	11	30
RIPF110IS	Ripiano scorrevole in acciaio inox per S110UBS	808x320x39	11	30
TIM24	Timer giornaliero	-	-	-
ESTINTORE	Estintore automatico in polvere da 1 kg per interno ed esterno	Ø 90x280	-	-
KIT4RUOTE	Set di 4 ruote piroettanti (2 autobloccanti) per UB	(A 105 mm)	-	-
KIT6RUOTE	Set di 6 ruote piroettanti (3 autobloccanti) per UB	(A 100 mm)	-	-

BASAMENTI DI APPOGGIO

CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CSFZ40	400 x 500 x 70	CSFZ120	1200 x 500 x 70
CSFZ50	500 x 500 x 70	CSFZ130	1300 x 500 x 70
CSFZ60	600 x 500 x 70	CSFZ140	1400 x 500 x 70
CSFZ80	800 x 500 x 70	CSFZ150	1500 x 500 x 70
CSFZ90	900 x 500 x 70	CSFZ160	1600 x 500 x 70
CSFZ100	1000 x 500 x 70	CSFZ170	1700 x 500 x 70
CSFZ110	1100 x 500 x 70	CSFZ180	1800 x 500 x 70

VENTILAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
DIAM125BPCE	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro, con controllo velocità, portata e contaore – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all'esterno)	290x290x270
DIAM125BP	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all'esterno)	290x290x270
CSF100BPAMY23	Elettroaspiratore ATEX con cavo di alimentazione e portafiltro – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all'esterno)	350x370x500
RSOL	Filtro a carboni attivi per solventi organici (consigliabile sostituirlo almeno una volta all'anno)	235x110x15
GFKIT100	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 100mm e 2 morsetti)	Ø 100 mm L 1000 mm
FC100FC	Raccordo quadro tondo per tubo flessibile diametro 100mm	Ø 100 mm
KIT2A	Kit di connessione per 2 armadi (guaina flessibile, giunto a T, morsetti), già assemblato	Ø 100 mm
KIT3A	Kit di connessione per 3 armadi (guaina flessibile, giunto a T, morsetti), già assemblato	Ø 100 mm
GFKIT125	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 125mm e 2 morsetti)	Ø 125 mm L 1000 mm
CFNUBCE	Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211 con controllo velocità, portata e contaore (filtro non incluso), dotata di ruote e 2 prese di ventilazione.	410x570x650
CFNUBL	Sistema di aspirazione senza allarme (filtro non incluso), dotata di ruote e 2 prese di ventilazione.	410x570x650
CSAS	Filtro a carboni attivi per solventi, prefiltro incluso (consigliabile sostituirlo almeno una volta all'anno)	510x400x60
CSMP	Filtro a carboni attivi per solventi e acidi, prefiltro incluso (consigliabile sostituirlo almeno una volta all'anno)	510x400x60
CSPF	Prefiltro (presente in tutti i filtri)	510x400x15

NOTA: I ripiani non sono opzionabili nei modelli con apertura a cassettone.



FAST CHOICE:
Per tutti i modelli UNDERBENCH, puoi aggiungere a fine codice: **S** (cerniere a sinistra), **D** (cerniere a destra), **W** (colore bianco), **C** (cassettone).