




ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

Certificati secondo le norme EN 61010-1; EN 16121 E CEI 66-5

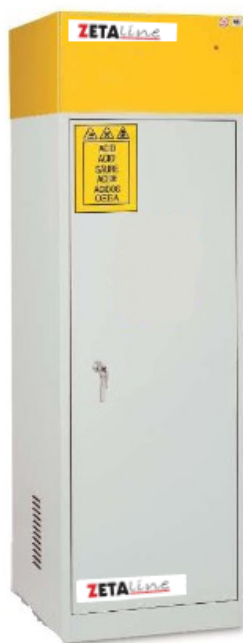

ZL-AB1K
ZETAline



ZL-AB2K
ZETAline

Con aspiratore e filtro inclusi - Porte piene

ROBUSTEZZA NATURALE E RESISTENZA CHIMICA

Armadi realizzati in legno stratificato HPL ad alta pressione, materiale altamente resistente a agenti chimici, urti e umidità, ideale per lo stoccaggio di prodotti chimici in ambienti di laboratorio, scolastici o di ricerca.

La struttura in pannelli HPL garantisce solidità e durabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo, mantenendo un'eccellente stabilità dimensionale e una superficie facilmente pulibile.

I ripiani a vaschetta, regolabili in altezza, permettono di contenere eventuali perdite o gocciolamenti di liquidi, offrendo un livello di sicurezza aggiuntivo durante lo stoccaggio.

Le cerniere e maniglie in acciaio assicurano una lunga durata nel tempo, mentre la predisposizione per sistemi di ventilazione consente di collegare l'armadio a impianti di aspirazione o filtrazione, migliorando il controllo dei vapori interni.

Questi armadi rappresentano una soluzione robusta, funzionale e resistente alla corrosione, ideale per laboratori scolastici, tecnici e di ricerca che necessitano di un armadio in materiale non metallico, con ottime prestazioni chimiche e meccaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruiti completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati Grigio RAL 7035
- Costruzione di tipo "smontabile" con alla base zoccolo metallico con piedini per la messa a livello degli armadi
- Parti metalliche (cerniere, fermagli, guide) verniciate contro la corrosione
- Apertura delle porte con un'angolazione superiore a 110°
- Serratura e chiave
- Due scomparti separati (su armadi a due porte)
- Maniglia a sinistra
- Carico max per ripiano: 40 Kg distribuiti uniformemente
- Sistema di ammortizzazione delle ante e cassetti
- Collare di connessione Ø 125 mm
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Conformità alle norme EN61010-1, EN16121 e CEI 66-5

**ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI**

Certificati secondo le norme EN 61010-1; EN 16121 E CEI 66-5

SERIE ZL-ABK

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	Peso (Kg)
ZL-AB1K	Armadio 1 porta Maniglia sinistra	600x600x1900 (1600+300)	550x550x1500	3 ripiani in PVC (carico massimo 40 Kg distribuiti uniformemente)	75	85
ZL-AB2K	Armadio 2 porte	1140x600x1900 (1600+300)	1090x580x1500	2 ripiani in PVC per scomparto (carico massimo 40 Kg distribuiti uniformemente)	100	99

*Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio

ACCESSORI (IN OPZIONE)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*
RIP60WPVC	RIPIANO fin PVC per ARMADIO 60	550x525x30	35	3
RIP120WPVC	RIPIANO fin PVC per ARMADIO 120	535x525x30	35	3
TIM24	Timer giornaliero			
ALLARME	Sistema di allarme porte aperte			

VENTILAZIONE (IN OPZIONE)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CE1250	Controller con display touch allarme, portata, velocità, stato filtri	
CS0500M	Allarme elettronico mancanza aspirazione	
ACF125	Motore di ricambio per sistema di aspirazione dall'anno 2015	-
GFKIT125	Kit di connessione esterna (1 metro di tubo diam. 125 mm e 2 morsetti)	Ø 125 mm, L 1000 mm
RFC60	Filtro per armadio da 60	290x235x16
RFC120	Filtro per armadio da 120	580x235x16
RFC60F	Filtro formalina per armadio da 60	290x235x16
RFC120F	Filtro formalina per armadio da 120	580x235x16