

Bagni ad ultrasuoni




Serie LBS 2

I modelli LBS 2 sono più performanti, dotati di timer digitale, variatore di potenza, possibilità di scelta tra due frequenze KHz, riscaldamento da 20 a 80°C e di allarme sonoro che entra in funzione quando la temperatura supera i valori impostati.

- La regolazione per gradi con precisione dell'1% della potenza massima con variazione dal 40% al 100% della massima potenza, permette di stabilire la potenza ottica per la degasazione, l'estrazione e la miscelazione
- Quattro modelli con frequenze operative 40Khz o 59 Khz. Tecnologia multifunzione del prodotto soddisfa ogni necessità
- Impostazione della temperatura da 20° a 80°C. La funzione auto allarme e spegnimento al raggiungimento della temperatura di ebollizione assicura protezione del sistema. L'efficienza termica a basso consumo e l'alta efficienza del sistema riscaldante è all'avanguardia rispetto ai sistemi tradizionali
- Vuoi ottenere all'istante la temperatura dell'acqua? Il display ti mostra la temperatura in tempo reale
- Il circuito ST Microelettronico ad alta velocità elimina completamente l'interferenza dell'ultrasuono sul circuito LCD

ACCESSORI

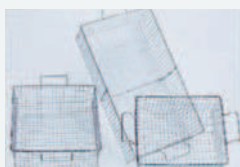

Dati tecnici		LBS 2 - 4,5	LBS 2 - 10	LBS 2 - 15	LBS 2 - 22,5
Capacità vasca	lt	4,5	10,0	15,0	22,5
Frequenza	KHz	40 o 59	40 o 59	40 o 59	40 o 59
Potenza picco	HF/W	150	300	450	650
Potenza assorbita	W	135	250	350	500
Regolazione potenza	%	40-100	40-100	40-100	40-100
Riscaldamento	°C	20-80	20-80	20-80	20-80
Timer		1-199	1-199	1-199	1-199
Scarico del rubinetto		no	si	si	si
Dim. vasca interna LxPxH	mm	300x150x100	300x240x150	330x300x150	500x300x150
Dim. vasca esterna LxPxH	mm	330x180x240	360x270x310	390x330x310	570x330x330
Peso	kg	3,4	6,9	9,4	12,7
Codice		616.1020.05	616.1020.08	616.1020.12	616.1020.14

Articolo	LBS 2 - 4,5	LBS 2 - 10	LBS 2 - 15	LBS 2 - 22,5
Coperchio in acciaio	616.1025.05	616.1025.08	616.1025.12	616.1025.14
Cestello in acciaio	616.1027.05	616.1027.08	616.1027.12	616.1027.14



Flacone concentrato al 10% PH12

Detergente universale per vasche ultrasuoni, adatto per la pulizia di vetrerie, ceramica, metalli e prodotti sintetici, eliminando residui grassi, organici ecc. Biodegradabile al 90%.

Codice

1 lt	616.1043.45
5 lt	616.1043.46