


# Bagni ad acqua

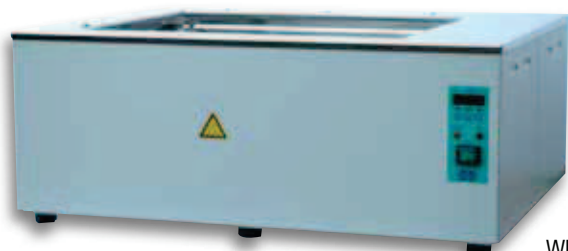


WB-MD50

## Serie WB-MD

- La struttura esterna è in ABS attermico mentre modello da 50 lt ha una struttura esterna in lamiera acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida
- Le vasche sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampate in un unico pezzo
- L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia
- La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termoregolatore digitale ad azione PID con sonda PT100
- Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa

Dati tecnici		WB-MD5	WB-MD15	WB-MD24	WB-MD50
Capacità vasca	lt	5	12	18,5	50
Classe di protezione	IP	42	42	42	42
Classe di sicurezza		3.1	3.1	3.1	3.1
Temperatura regolabile	°C	da +5 amb. a +120	da +5 amb. a +120	da +5 amb. a +120	da +5 amb. a +120
Precisione in vasca con H <sub>2</sub> O	°C	±0,5	±0,5	±0,5	±1,0
Scarico + livello		no	no	si	si
Potenza resistenza riscaldante	W	700	1400	2100	3000
Dimensioni interne LxPxH	mm	100x250x150	255x290x150	255x440x150	440x560x200
Dimensioni esterne LxPxH	mm	280x360x240	445x385x240	445x560x240	835x670x320
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Peso	kg	5,2	6,2	9	33
<b>Codice</b>		<b>610.1006.05</b>	<b>610.1006.15</b>	<b>610.1006.24</b>	<b>610.1006.50</b>

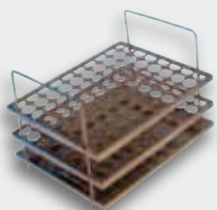


Portaprovette a tre piani in acciaio

	2 per vasca	1 per vasca	2 per vasca	4 per vasca
	12 fori Ø21 125x100x150	48 fori Ø21 250x170x150	48 fori Ø21 250x170x150	48 fori Ø21 250x170x150
<b>Codice</b>	<b>212.1250.02</b>	<b>212.1250.05</b>	<b>212.1250.05</b>	<b>212.1250.05</b>
	20 fori Ø17 125x100x150	60 fori Ø17 250x170x150	60 fori Ø17 250x170x150	60 fori Ø17 250x170x150
<b>Codice</b>	<b>212.1250.03</b>	<b>212.1250.06</b>	<b>212.1250.06</b>	<b>212.1250.06</b>



Coperchio a cupola in policarbonato trasparente (resistenza 120°C)

<b>Codice</b>	<b>610.1007.28</b>	<b>610.1007.32</b>	<b>610.1007.33</b>	-
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

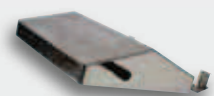

Coperchio a cupola in acciaio inox

<b>Codice</b>	-	-	-	<b>610.1007.29</b>
---------------	---	---	---	--------------------



Coperchio piatto in acciaio ad anelli concentrici (Ømax per foro 85 mm)

n. fori	2	4	6	20
<b>Codice</b>	<b>610.1007.35</b>	<b>610.1007.34</b>	<b>610.1007.36</b>	<b>610.1007.37</b>