

**CHEMISAFE®**  
SAFETY STORAGE CABINETS

## COMBISTORAGE



# COMBISTORAGE

## ARMADI DI SICUREZZA COMBINATI CERTIFICATI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI PERICOLOSI.

La soluzione per la conservazione e l'utilizzo  
direttamente in laboratorio dei prodotti pericolosi.



### COMBISTORAGE FIRE TYPE 90



Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Particolare coibentazione con calcio **silicato** su pannelli per alta temperatura (800 °C) in fibra minerale (**esente da Fibrocementa**) ad alta densità 300 Kg/m3 **fissati con collanti ceramici**.

Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

**Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.**

**Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.**

**Possibilità di aggiungere zoccolatura per composizioni di più moduli.**

**Di serie:**

- CHIUSURA AUTOMATICA in caso di temperatura > 47 °C.
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul retro dell' armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termoisolante di 3 cm (DIN 4102).
- **MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.**



### COMBISTORAGE CHIMICI



Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Pannelli in laminato melaminico idrofughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

**Certificazione secondo la nuova norma EN 14727 ed EN 61010.**

**Regolazione di messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.**

**Possibilità di aggiungere zoccolatura per composizioni di più moduli.**

**Di serie:**

- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- **MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.**



## COMBISTORAGE UNDERBENCH / 620 H / 720 H



Per ottimizzare gli spazi in laboratorio.  
Basta sostituire i classici armadietti in legno  
o metallo, sottocappa o sottobanco,  
con una combinazione di più armadi di sicurezza.



## COMBISTORAGE 2, 3, 4 COMPARTI



Per raggruppare in sicurezza tutte le sostanze pericolose in laboratorio.



## COMBISTORAGE UNDERBENCH / 620 H / 720 H



Infinite varianti per dimensioni e tipologie e pericolosità.

Gli armadi di sicurezza COMBISTORAGE UNDERBENCH possono essere combinati su zoccoli di diversa lunghezza.

(Permette di avere un unico zoccolo per composizione: ACIDI + BASI + INFIAMMABILI).

Possibilità di aspirazione.

Tutti i modelli  
underbench  
sono disponibili  
in 2 altezze:  
**620** mm  
**720** mm  
+ eventuale zoccolo  
H **80** mm



**CS714AS** (395 x 520 x 720 mm)  
+ **CSF710** (990 x 520 x 720 mm)



**CSFZ120** (zoccolo 1200 x 500 x 80 mm)  
+ **CS716BS** (595 x 520 x 720) + **CSF706D** (595 x 520 x 720 mm)




**CSFZ150** (zoccolo 1500 x 500 x 80 mm)  
+ **CS715AC** (495 x 520 x 720) + **CSF706C** (595 x 520 x 720 mm)  
+ **CS714BC** (395 x 520 x 720)



**CSFZ100** (zoccolo 1000 x 500 x 80 mm) + **CSF610** (990 x 520 x 620 mm)

# **COMBISTORAGE UNDERBENCH INFIAMMABILI TYPE 90 / 620 H / 720 H**

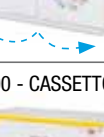

| APERTURA<br>E CERNIERA                                                                                   | CODICE<br>INF.<br>TYPE 90 | DIMENSIONI<br>ESTERNE<br>L x P x A mm | DIMENSIONI<br>INTERNE<br>L x P x A mm | CAPACITA'<br>BOTTIGLIE<br>DA 1 LITRO<br>PER ARMADIO | PESO<br>Kg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 500 - DESTRA<br>        | <b>CSF605D</b>            | 495 x 520 x <b>620</b>                | 383 x 349 x 493                       | 12                                                  | 73         |
|                                                                                                          | <b>CSF705D</b>            | 495 x 520 x <b>720</b>                | 383 x 349 x 593                       | 12                                                  | 78         |
| 500 - SINISTRA<br>      | <b>CSF605S</b>            | 495 x 520 x <b>620</b>                | 383 x 349 x 493                       | 12                                                  | 73         |
|                                                                                                          | <b>CSF705S</b>            | 495 x 520 x <b>720</b>                | 383 x 349 x 593                       | 12                                                  | 78         |
| 500 - CASSETTONE<br>    | <b>CSF605C</b>            | 495 x 520 x <b>620</b>                | 383 x 349 x 493                       | 12                                                  | 73         |
|                                                                                                          | <b>CSF705C</b>            | 495 x 520 x <b>720</b>                | 383 x 349 x 593                       | 12                                                  | 78         |
| 600 - DESTRA<br>       | <b>CSF606D</b>            | 595 x 520 x <b>620</b>                | 483 x 349 x 493                       | 15                                                  | 82         |
|                                                                                                          | <b>CSF706D</b>            | 595 x 520 x <b>720</b>                | 483 x 349 x 593                       | 15                                                  | 87         |
| 600 - SINISTRA<br>    | <b>CSF606S</b>            | 595 x 520 x <b>620</b>                | 483 x 349 x 493                       | 15                                                  | 82         |
|                                                                                                          | <b>CSF706S</b>            | 595 x 520 x <b>720</b>                | 483 x 349 x 593                       | 15                                                  | 87         |
| 600 - CASSETTONE<br>  | <b>CSF606C</b>            | 595 x 520 x <b>620</b>                | 483 x 349 x 493                       | 15                                                  | 82         |
|                                                                                                          | <b>CSF706C</b>            | 595 x 520 x <b>720</b>                | 483 x 349 x 593                       | 15                                                  | 87         |
| 1000 - 2 PORTE<br>    | <b>CSF610</b>             | 990 x 520 x <b>620</b>                | 878 x 349 x 493                       | 27                                                  | 118        |
|                                                                                                          | <b>CSF710</b>             | 990 x 520 x <b>720</b>                | 878 x 349 x 593                       | 27                                                  | 125        |
| 1000 - CASSETTONE<br> | <b>CSF610C</b>            | 990 x 520 x <b>620</b>                | 878 x 349 x 493                       | 27                                                  | 118        |
|                                                                                                          | <b>CSF710C</b>            | 990 x 520 x <b>720</b>                | 878 x 349 x 593                       | 27                                                  | 125        |
| 1100 - 2 PORTE<br>    | <b>CSF611</b>             | 1090 x 520 x <b>620</b>               | 978 x 349 x 493                       | 30                                                  | 134        |
|                                                                                                          | <b>CSF711</b>             | 1090 x 520 x <b>720</b>               | 978 x 349 x 593                       | 30                                                  | 139        |
| 1100 - CASSETTONE<br> | <b>CSF611C</b>            | 1090 x 520 x <b>620</b>               | 978 x 349 x 493                       | 30                                                  | 134        |
|                                                                                                          | <b>CSF711C</b>            | 1090 x 520 x <b>720</b>               | 978 x 349 x 593                       | 30                                                  | 139        |

Aggiungere zoccolo se necessario.

Gli armadi di sicurezza COMBISTORAGE UNDERBENCH possono essere combinati su zoccoli di diversa lunghezza.  
 (Permette di avere un unico zoccolo per composizione: ACIDI + BASI + INFIAMMABILI).

| CODICE<br>ZOCCOLO | DIMENSIONI<br>L x P x A mm |
|-------------------|----------------------------|
| <b>CSFZ40</b>     | 400 x 500 x 80             |
| <b>CSFZ50</b>     | 500 x 500 x 80             |
| <b>CSFZ60</b>     | 600 x 500 x 80             |
| <b>CSFZ70</b>     | 700 x 500 x 80             |
| <b>CSFZ80</b>     | 800 x 500 x 80             |
| <b>CSFZ90</b>     | 900 x 500 x 80             |
| <b>CSFZ100</b>    | 1000 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ110</b>    | 1100 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ120</b>    | 1200 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ130</b>    | 1300 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ140</b>    | 1400 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ150</b>    | 1500 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ160</b>    | 1600 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ170</b>    | 1700 x 500 x 80            |
| <b>CSFZ180</b>    | 1800 x 500 x 80            |



Vasca di fondo con griglia in acciaio verniciato.

| CODICE          | RIPIANI<br>UNDERBENCH<br>INFIAMMABILI                  | DIMENSIONI<br>ESTERNE<br>L x P x A mm |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RIPF50V</b>  | Ripiano in acciaio verniciato per INFIAMMABILI da 500  | 380 x 330 x 30                        |
| <b>RIPF60V</b>  | Ripiano in acciaio verniciato per INFIAMMABILI da 600  | 480 x 330 x 30                        |
| <b>RIPF100V</b> | Ripiano in acciaio verniciato per INFIAMMABILI da 1000 | 875 x 330 x 30                        |
| <b>RIPF110V</b> | Ripiano in acciaio verniciato per INFIAMMABILI da 1100 | 975 x 330 x 30                        |

Colore di serie GRIGIO RAL 7035, aggiungere "Y" al codice per armadio GIALLO RAL 1021.

Se INOX sostituire la "V" con la "I".

## COMBISTORAGE UNDERBENCH CHIMICI / 620 H / 720 H



Aggiungere zoccolo se necessario.

| APERTURA<br>E CERNIERA                                                                                  | CODICE<br>ACIDI | CODICE<br>BASI | DIMENSIONI<br>ESTERNE<br>L x P x A mm | DIMENSIONI<br>INTERNE<br>L x P x A mm | CAPACITA'<br>BOTTIGLIE<br>DA 1 LITRO<br>PER ARMADIO | PESO<br>Kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 400 - DESTRA<br>       | <b>CS140AD</b>  | <b>CS140BD</b> | 395 x 520 x <b>620</b>                | 330 x 430 x 530                       | 18                                                  | 51         |
|                                                                                                         | <b>CS714AD</b>  | <b>CS714BD</b> | 395 x 520 x <b>720</b>                | 330 x 430 x 630                       | 18                                                  | 54         |
| 400 - SINISTRA<br>     | <b>CS140AS</b>  | <b>CS140BS</b> | 395 x 520 x <b>620</b>                | 330 x 430 x 530                       | 18                                                  | 51         |
|                                                                                                         | <b>CS714AS</b>  | <b>CS714BS</b> | 395 x 520 x <b>720</b>                | 330 x 430 x 630                       | 18                                                  | 54         |
| 400 - CASSETTONE<br>   | <b>CS140AC</b>  | <b>CS140BC</b> | 395 x 520 x <b>620</b>                | 330 x 430 x 530                       | 9                                                   | 51         |
|                                                                                                         | <b>CS714AC</b>  | <b>CS714BC</b> | 395 x 520 x <b>720</b>                | 330 x 430 x 630                       | 9                                                   | 54         |
| 500 - DESTRA<br>      | <b>CS150AD</b>  | <b>CS150BD</b> | 495 x 520 x <b>620</b>                | 430 x 430 x 530                       | 24                                                  | 53         |
|                                                                                                         | <b>CS715AD</b>  | <b>CS715BD</b> | 495 x 520 x <b>720</b>                | 430 x 430 x 630                       | 24                                                  | 56         |
| 500 - SINISTRA<br>   | <b>CS150AS</b>  | <b>CS150BS</b> | 495 x 520 x <b>620</b>                | 430 x 430 x 530                       | 24                                                  | 53         |
|                                                                                                         | <b>CS715AS</b>  | <b>CS715BS</b> | 495 x 520 x <b>720</b>                | 430 x 430 x 630                       | 24                                                  | 56         |
| 500 - CASSETTONE<br> | <b>CS150AC</b>  | <b>CS150BC</b> | 495 x 520 x <b>620</b>                | 430 x 430 x 530                       | 12                                                  | 53         |
|                                                                                                         | <b>CS715AC</b>  | <b>CS715BC</b> | 495 x 520 x <b>720</b>                | 430 x 430 x 630                       | 12                                                  | 56         |
| 600 - DESTRA<br>     | <b>CS160AD</b>  | <b>CS160BD</b> | 595 x 520 x <b>620</b>                | 530 x 430 x 530                       | 30                                                  | 55         |
|                                                                                                         | <b>CS716AD</b>  | <b>CS716BD</b> | 595 x 520 x <b>720</b>                | 530 x 430 x 630                       | 30                                                  | 58         |
| 600 - SINISTRA<br>   | <b>CS160AS</b>  | <b>CS160BS</b> | 595 x 520 x <b>620</b>                | 530 x 430 x 530                       | 30                                                  | 55         |
|                                                                                                         | <b>CS716AS</b>  | <b>CS716BS</b> | 595 x 520 x <b>720</b>                | 530 x 430 x 630                       | 30                                                  | 58         |
| 600 - CASSETTONE<br> | <b>CS160AC</b>  | <b>CS160BC</b> | 595 x 520 x <b>620</b>                | 530 x 430 x 530                       | 15                                                  | 55         |
|                                                                                                         | <b>CS716AC</b>  | <b>CS716BC</b> | 595 x 520 x <b>720</b>                | 530 x 430 x 630                       | 15                                                  | 58         |



| CODICE           | RIPIANI<br>UNDERBENCH<br>ACIDI       | DIMENSIONI<br>ESTERNE<br>L x P x A mm |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RIPCS140V</b> | Ripiano verniciato per ACIDI da 400  | 325 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS150V</b> | Ripiano verniciato per ACIDI da 500  | 452 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS160V</b> | Ripiano verniciato per ACIDI da 600  | 525 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS100V</b> | Ripiano verniciato per ACIDI da 1000 | 385 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS110V</b> | Ripiano verniciato per ACIDI da 1100 | 485 x 420 x 30                        |



**CS716AD**

Colore di serie GRIGIO RAL 7035, aggiungere "Y" al codice per armadio GIALLO RAL 1021.

## COMBISTORAGE UNDERBENCH CHIMICI / 620 H / 720 H



Aggiungere zoccolo se necessario.

| APERTURA<br>E CERNIERA | CODICE<br><b>ACIDI<br/>+ BASI</b> | DIMENSIONI<br>ESTERNE<br>L x P x A mm | DIMENSIONI INTERNE<br>L x P x A mm | CAPACITA'<br>BOTTIGLIE<br>DA 1 LITRO<br>PER ARMADIO | PESO<br>Kg |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1000 - 2 PORTE<br>     | <b>CS100AB</b>                    | 990 x 520 x <b>620</b>                | 450 + 450 x 430 x 530              | 18 + 18                                             | 104        |
|                        | <b>CS710AB</b>                    | 990 x 520 x <b>720</b>                | 450 + 450 x 430 x 630              | 18 + 18                                             | 110        |
| 1000 - CASSETTONE<br>  | <b>CS100CAB</b>                   | 990 x 520 x <b>620</b>                | 450 + 450 x 430 x 530              | 9 + 9                                               | 104        |
|                        | <b>CS710CAB</b>                   | 990 x 520 x <b>720</b>                | 450 + 450 x 430 x 630              | 9 + 9                                               | 110        |
| 1100 - 2 PORTE<br>     | <b>CS110AB</b>                    | 1090 x 520 x <b>620</b>               | 490 + 490 x 430 x 530              | 24 + 24                                             | 104        |
|                        | <b>CS711AB</b>                    | 1090 x 520 x <b>720</b>               | 490 + 490 x 430 x 630              | 24 + 24                                             | 114        |
| 1100 - CASSETTONE<br>  | <b>CS110CAB</b>                   | 1090 x 520 x <b>620</b>               | 490 + 490 x 430 x 530              | 12 + 12                                             | 104        |
|                        | <b>CS711CAB</b>                   | 1090 x 520 x <b>720</b>               | 490 + 490 x 430 x 630              | 12 + 12                                             | 114        |

| CODICE           | RIPIANI<br>UNDERBENCH<br>BASI | DIMENSIONI<br>ESTERNE<br>L x P x A mm |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RIPCS140I</b> | Ripiano INOX per BASI da 400  | 325 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS150I</b> | Ripiano INOX per BASI da 500  | 452 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS160I</b> | Ripiano INOX per BASI da 600  | 525 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS100I</b> | Ripiano INOX per BASI da 1000 | 385 x 420 x 30                        |
| <b>RIPCS110I</b> | Ripiano INOX per BASI da 1100 | 485 x 420 x 30                        |

Colore di serie GRIGIO RAL 7035, aggiungere "Y" al codice per armadio GIALLO RAL 1021.



CS710CAB



CS711AB



CSFZ160 (zoccolo 1600 x 500 x 80 mm)  
 + CS716BS (495 x 520 x **720**) + CS160AC (495 x 520 x **620** mm)  
 + CSF705D (595 x 520 x **720** mm)



Doppio sistema di tenuta impedisce la fuoriuscita di esalazioni e l'ingresso di aria calda in caso di incendio.



Messa a livello dell'armadio.

## COMBISTORAGE 2

Armadi di sicurezza combinati certificati per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI, CHIMICI, ACIDI e BASI.



CS260



CS360



CS360C

| CODICE           | RIPIANI COMBISTORAGE 2                         | DIMENSIONI ESTERNE - L x P x A mm |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>RIPCS260V</b> | Ripiano in acciaio verniciato per ACIDI da 60  | 525 x 420 x 30                    |
| <b>RIPCS260I</b> | Ripiano in acciaio INOX per BASI da 60         | 525 x 420 x 30                    |
| <b>RIPF60I</b>   | Ripiano in acciaio INOX per INFIAMMABILI da 60 | 480 x 330 x 30                    |

| CODICE        | DESCRIZIONE                                                                                                   | DIMENSIONI ESTERNE<br>L x P x A mm | DIMENSIONI INTERNE<br>L x P x A mm                                | NUMERO E TIPO RIPIANI                                                                                            | PESO<br>Kg |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CS260</b>  | Combistorage 2 comparti SENZA ASPIRAZIONE:<br>ACIDI / BASI ( porta )<br>+ INFIAMMABILI TYPE 90 ( porta )      | 595 x 600 x 1685                   | 530 x 430 x 630 ACIDI / BASI<br>+<br>483 x 349 x 593 INFIAMMABILI | Scomparto ACIDI, BASI:<br>1 in acciaio verniciato + 1 in acciaio inox<br>Scomparto INFIAMMABILI: vasca e griglia | 145        |
| <b>CS260C</b> | Combistorage 2 comparti SENZA ASPIRAZIONE:<br>ACIDI / BASI ( porta )<br>+ INFIAMMABILI TYPE 90 ( cassettoni ) | 595 x 600 x 1685                   | 530 x 430 x 630 ACIDI / BASI<br>+<br>483 x 349 x 593 INFIAMMABILI | Scomparto ACIDI, BASI:<br>1 in acciaio verniciato + 1 in acciaio inox<br>Scomparto INFIAMMABILI: vasca e griglia | 145        |
| <b>CS360</b>  | Combistorage 2 comparti CON ASPIRAZIONE:<br>ACIDI / BASI ( porta )<br>+ INFIAMMABILI TYPE 90 ( porta )        | 595 x 600 x 1685 + 300             | 530 x 430 x 630 ACIDI / BASI<br>+<br>483 x 349 x 593 INFIAMMABILI | Scomparto ACIDI, BASI:<br>1 in acciaio verniciato + 1 in acciaio inox<br>Scomparto INFIAMMABILI: vasca e griglia | 170        |
| <b>CS360C</b> | Combistorage 2 comparti CON ASPIRAZIONE:<br>ACIDI / BASI ( porta )<br>+ INFIAMMABILI TYPE 90 ( cassettoni )   | 595 x 600 x 1685 + 300             | 530 x 430 x 630 ACIDI / BASI<br>+<br>483 x 349 x 593 INFIAMMABILI | Scomparto ACIDI, BASI:<br>1 in acciaio verniciato + 1 in acciaio inox<br>Scomparto INFIAMMABILI: vasca e griglia | 170        |

Colore di serie GRIGIO RAL 7035, aggiungere "Y" al codice per armadio GIALLO RAL 1021.

## COMBISTORAGE 3

Armadio di sicurezza combinato certificato per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI, CHIMICI, ACIDI e BASI.



CS343MY11

| CODICE            | RIPIANI COMBISTORAGE 3 e 4                        | DIMENSIONI ESTERNE - L x P x A mm |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>RIP60VMY11</b> | Ripiano in acciaio verniciato per FIRE 60         | 490 x 420 x 30                    |
| <b>RIP60MY11</b>  | Ripiano in acciaio INOX per FIRE 60               | 490 x 420 x 30                    |
| <b>RIPCS60</b>    | Ripiano in acciaio verniciato per ACIDI / TOSSICI | 550 x 480 x 30                    |
| <b>RIPX60</b>     | Ripiano in acciaio INOX per BASI                  | 550 x 480 x 30                    |



CS342MY11



CS344MY11

## COMBISTORAGE 4




Armadi di sicurezza combinati con porte cieche e porte a vetro  
 certificati per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI, CHIMICI, ACIDI, BASI e TOSSICI.

| CODICE           | DESCRIZIONE                                   | DIMENSIONI ESTERNE<br>L x P x A mm | DIMENSIONI INTERNE<br>L x P x A mm                                                   | NUMERO E TIPO RIPIANI                                                                                                                                                                                   | PESO<br>Kg |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CS343MY11</b> | COMBISTORAGE 3<br>compartimenti porte cieche  | 1200 x 600 x 1950                  | 496 x 446 x 1540 INFIAMMABILI<br>+<br>590 x 500 x 880 x 2 ( ACIDI + BASI )           | Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto BASI: 2 in acciaio inox<br>Scomparto INFIAMMABILI: 3 in acciaio verniciato<br>+ 1 vasca con griglia                                               | 310        |
| <b>CS342MY11</b> | COMBISTORAGE 4<br>compartimenti porte cieche  | 1200 x 600 x 1950                  | 496 x 446 x 1540 INFIAMMABILI<br>+<br>3 x 590 x 500 x 580 ( ACIDI + BASI + TOSSICI ) | Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto BASI: 2 in acciaio inox<br>Scomparto TOSSICI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto INFIAMMABILI: 3 in acciaio verniciato<br>+ 1 vasca con griglia | 313        |
| <b>CS344MY11</b> | COMBISTORAGE 4<br>compartimenti porte a vetro | 1200 x 600 x 1950                  | 496 x 446 x 1540 INFIAMMABILI<br>+<br>3 x 590 x 500 x 580 ( ACIDI + BASI + TOSSICI ) | Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto BASI: 2 in acciaio inox<br>Scomparto TOSSICI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto INFIAMMABILI: 3 in acciaio verniciato<br>+ 1 vasca con griglia | 315        |

Colore di serie GRIGIO RAL 7035, aggiungere "Y" al codice per armadio GIALLO RAL 1021.

## COMBISTORAGE 120 IC FIRE TYPE 90

Armadio di sicurezza combinato certificato 90 minuti per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI, ACIDI e BASI.

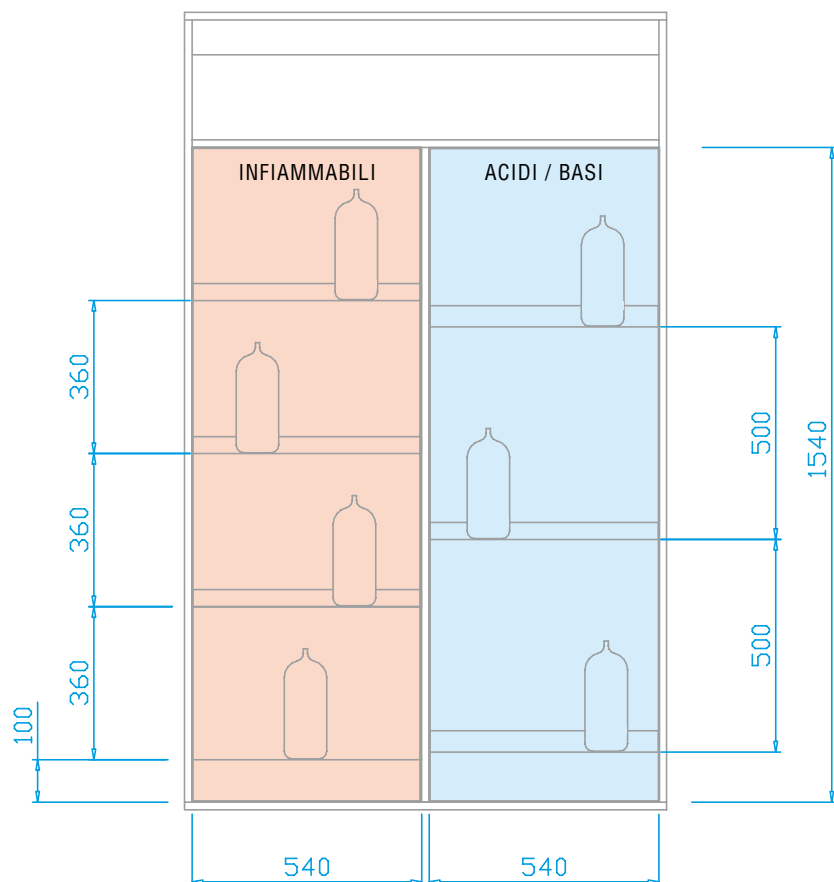

CSF232/2C

| CODICE            | RIPIANI PER COMBISTORAGE 120 IC, 120 IAB, 120 IABT | DIMENSIONI ESTERNE - L x P x A mm |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>RIP60VMY11</b> | Ripiano in acciaio verniciato per FIRE 60          | 490 x 420 x 30                    |
| <b>RIP60MY11</b>  | Ripiano in acciaio INOX per FIRE 60                | 490 x 420 x 30                    |
| <b>CSF85P</b>     | Ripiano in acciaio INOX per BASI                   | 536 x 420 x 39                    |
| <b>CSF45P</b>     | Ripiano in acciaio verniciato per ACIDI e TOSSICI  | 536 x 420 x 39                    |


| CODICE           | DESCRIZIONE                        | DIMENSIONI ESTERNE<br>L x P x A mm | DIMENSIONI INTERNE<br>L x P x A mm | NUMERO E TIPO RIPIANI                                                                                                                                                                                           | PESO<br>Kg |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CSF232/2C</b> | COMBISTORAGE 120 IC FIRE TYPE 90   | 1200 x 600 x 1950                  | 1090 x 446 x 1540                  | Scomparto INFIAMMABILI:<br>3 ripiani in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia<br>Scomparto ACIDI / BASI: 3 in acciaio verniciato                                                                             | 378        |
| <b>CSF232/3C</b> | COMBISTORAGE 120 IAB FIRE TYPE 90  | 1200 x 600 x 1950                  | 1090 x 446 x 1540                  | Scomparto INFIAMMABILI:<br>3 ripiani in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia<br>Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto BASI: 2 in acciaio INOX                                               | 378        |
| <b>CSF232/4C</b> | COMBISTORAGE 120 IABT FIRE TYPE 90 | 1200 x 600 x 1950                  | 1090 x 446 x 1540                  | Scomparto INFIAMMABILI:<br>3 ripiani in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia<br>Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto BASI: 2 in acciaio INOX<br>Scomparto TOSSICI: 1 in acciaio verniciato | 378        |

Colore di serie GRIGIO RAL 7035, aggiungere "Y" al codice per armadio GIALLO RAL 1021.

## COMBISTORAGE 120 IAB FIRE TYPE 90



Armadio di sicurezza combinato certificato 90 minuti per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI, ACIDI e BASI.

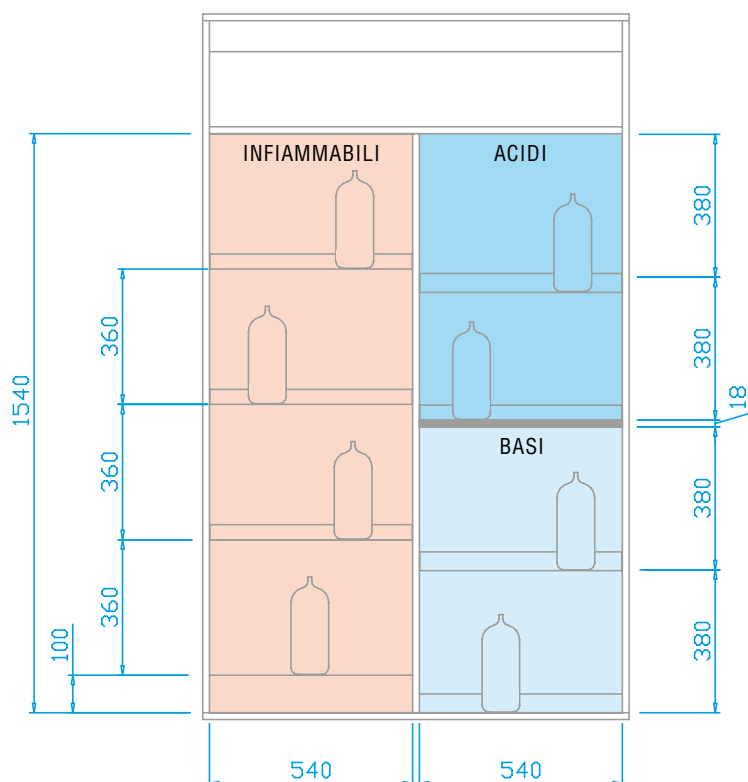

CSF232/3C


## COMBISTORAGE 120 IABT FIRE TYPE 90




Armadio di sicurezza combinato certificato per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI, ACIDI, BASI e TOSSICI.



CSF232/4C

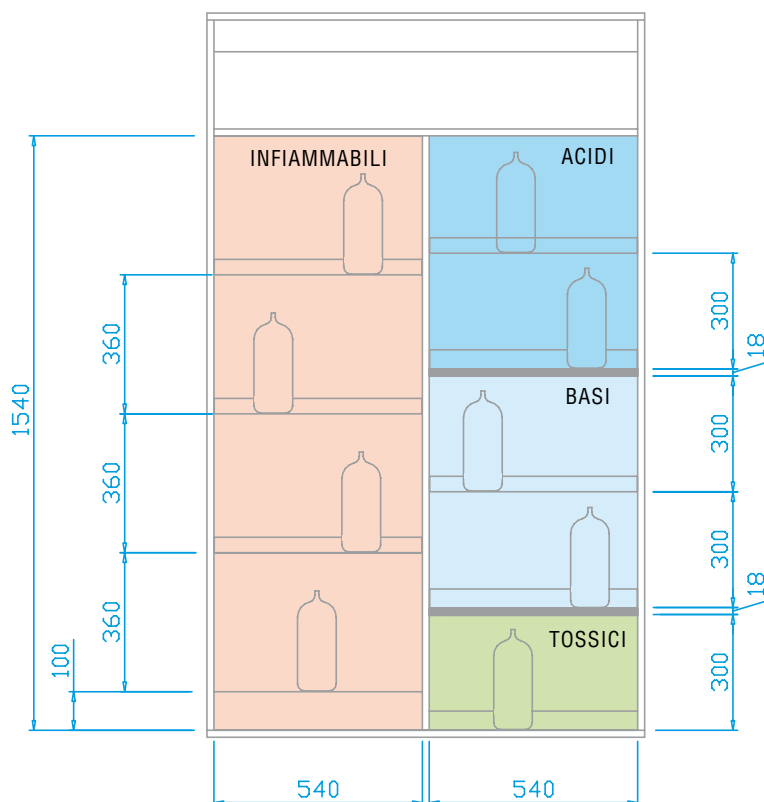

## COMBISTORAGE 60 IC FIRE TYPE 90

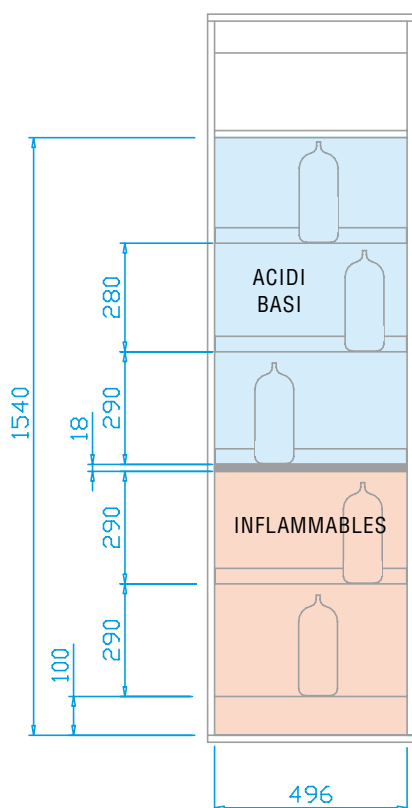

CSF239/2C


Armadio di sicurezza combinato certificato 90 minuti per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI e CHIMICI.

| CODICE            | RIPIANI PER COMBISTORAGE 60 IC, 60 IAB            | DIMENSIONI ESTERNE L x P x H mm |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>RIP60VMY11</b> | Ripiano in acciaio verniciato per FIRE 60         | 490 x 420 x 30                  |
| <b>RIP60MY11</b>  | Ripiano in acciaio INOX per FIRE 60               | 490 x 420 x 30                  |
| <b>CSF85P</b>     | Ripiano in acciaio INOX per BASI                  | 536 x 420 x 39                  |
| <b>CSF45P</b>     | Ripiano in acciaio verniciato per ACIDI e TOSSICI | 536 x 420 x 39                  |

## COMBISTORAGE 60 IAB FIRE TYPE 90



Armadio di sicurezza combinato certificato 90 minuti per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI e CHIMICI.

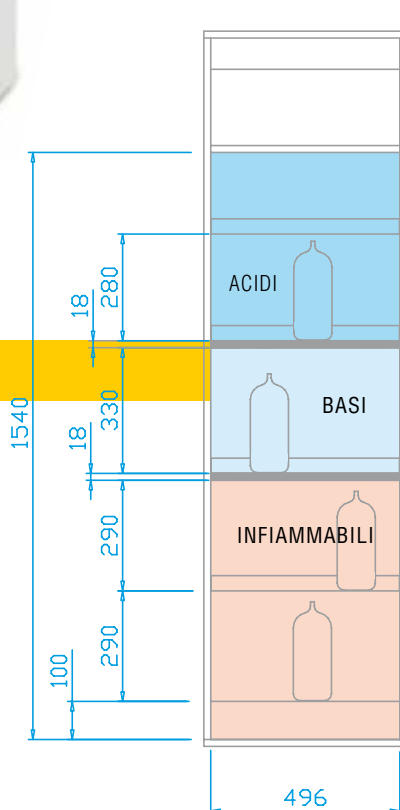

CSF239/3C

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                    | DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm | DIMENSIONI INTERNE L x P x A mm | NUMERO E TIPO RIPIANI                                                                                                                                             | PESO Kg |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>CSF239/2C</b> | COMBISTORAGE 60 IC FIRE 90                                                     | 595 x 600 x 1950                | 496 x 446 x 1540                | Scomparto INFIAMMABILI:<br>1 ripiano in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia<br>Scomparto ACIDI / BASI: 3 in acciaio verniciato                               | 230     |
| <b>CSF239/3C</b> | COMBISTORAGE 60 IAB FIRE 90:<br>INFIAMMABILI 60 x 60 x 200 A<br>+ ACIDI + BASI | 595 x 600 x 1950                | 496 x 446 x 1540                | Scomparto INFIAMMABILI:<br>1 ripiano in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia<br>Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato<br>Scomparto BASI: 1 in acciaio INOX | 232     |

Colore di serie GRIGIO RAL 7035, aggiungere "Y" al codice per armadio GIALLO RAL 1021.

## SISTEMI DI VENTILAZIONE E ASPIRAZIONE



CSF100BPMY11







CSF120MY11




CFN

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | DIMENSIONI<br>L x P x A mm |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CSF100BPMY11</b>  | Elettroaspiratore in box metallico ON / OFF<br>fusibili e cavo alimentazione con vano portafiltro                                                                        | 270 x 260 x 430            |
| <b>CSF100ABPMY11</b> | Elettroaspiratore ATEX in box metallico ON / OFF fusibili<br>e cavo alimentazione con vano portafiltro                                                                   | 270 x 260 x 430            |
| <b>F100</b>          | Collare trasformazione quadro tondo per CS100BPMY11<br>e CSF100ABPMY11 per UNDERBENCH                                                                                    |                            |
| <b>CS125/100</b>     | KIT VENTILAZIONE PER UNDERBENCH ACIDI E BASI<br>Completo di interruttore e cavo alimentazione<br>220 V - 50 Hz - 13 W - 36 dB - 105 m <sup>3</sup> /h - 28 Pa - Ø 100 mm |                            |
| <b>CSF120MY11</b>    | Unità di aspirazione per COMBISTORAGE 3C e 4C                                                                                                                            | 1200 x 500 x 300           |
| <b>CFN</b>           | Sistema di aspirazione molecolare<br>Certificato secondo norma NFX15-211 ( Filtro non incluso )                                                                          | 550 x 500 x 200            |
| <b>ADMY11CFN</b>     | Adattatore per CFN per modelli 3C and 4C                                                                                                                                 | 850 x 500 x 80             |
| <b>ADCFNMY11</b>     | Adattatore per CFN per armadi COMBI IC, IAB, ABT                                                                                                                         | 600 x 500 x 80             |
| <b>CSAS</b>          | Filtro a carbone per SOLVENTI ( per CFN )                                                                                                                                | 510 x 400 x 60             |
| <b>CSBE</b>          | Filtro a carbone per ACIDI ( per CFN )                                                                                                                                   | 510 x 400 x 60             |
| <b>CSMP</b>          | Filtro a carbone per ACIDI E SOLVENTI ( per CFN )                                                                                                                        | 510 x 400 x 60             |
| <b>CSPF</b>          | FILTRO PER POLVERI ( Ricambio per CFN )                                                                                                                                  |                            |
| <b>RSOL</b>          | Filtro a carbone attivo - infiammabili per CSF100BPMY11                                                                                                                  | 245 x 110 x 20             |
| <b>KIT2A</b>         | Kit tubazioni per connessione 2 armadi                                                                                                                                   |                            |
| <b>KIT3A</b>         | Kit tubazioni per connessione 3 armadi                                                                                                                                   |                            |
| <b>AC510</b>         | Tubo PVC flessibile diam. 102 mm. Completo di 2 fascette                                                                                                                 |                            |

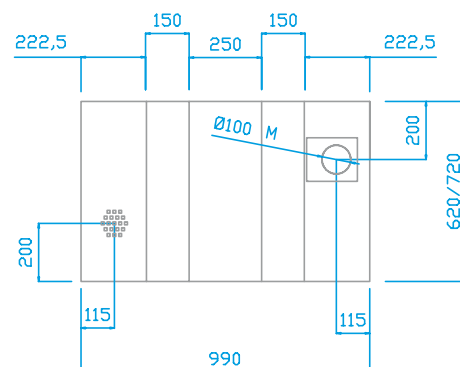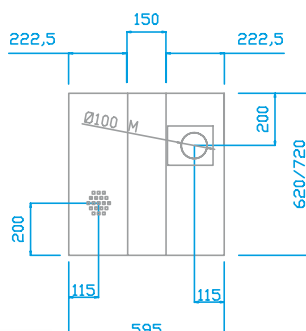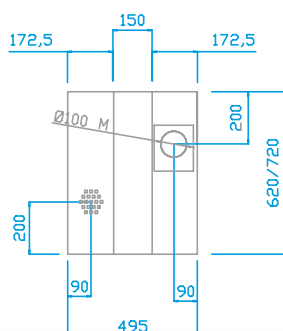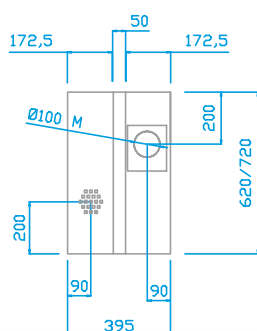


**1** Sistema di chiusura termico delle porte con chiusura automatica delle porte ad una temperatura > 50 °C.


**2** Sistema di aspirazione Ø 100 mm.

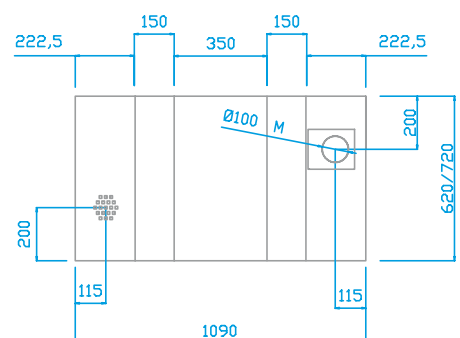



## COMBISTORAGE UNDERBENCH FIRE TYPE 90

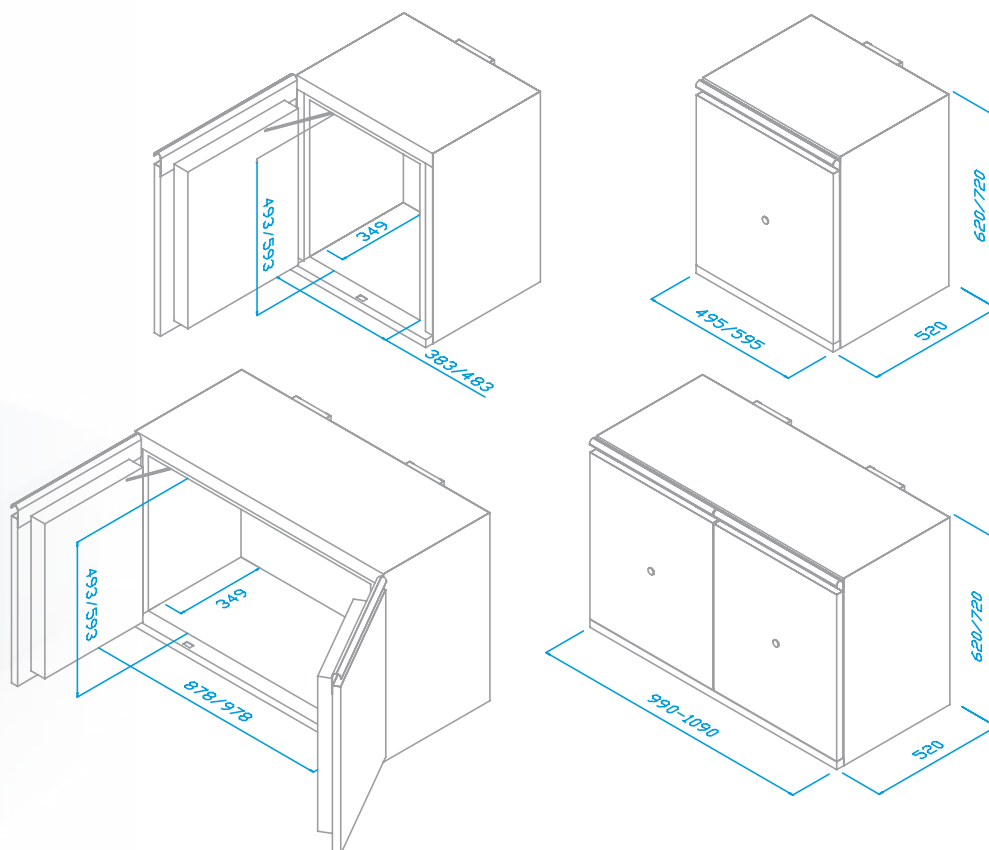



## COMBISTORAGE UNDERBENCH CHIMICI

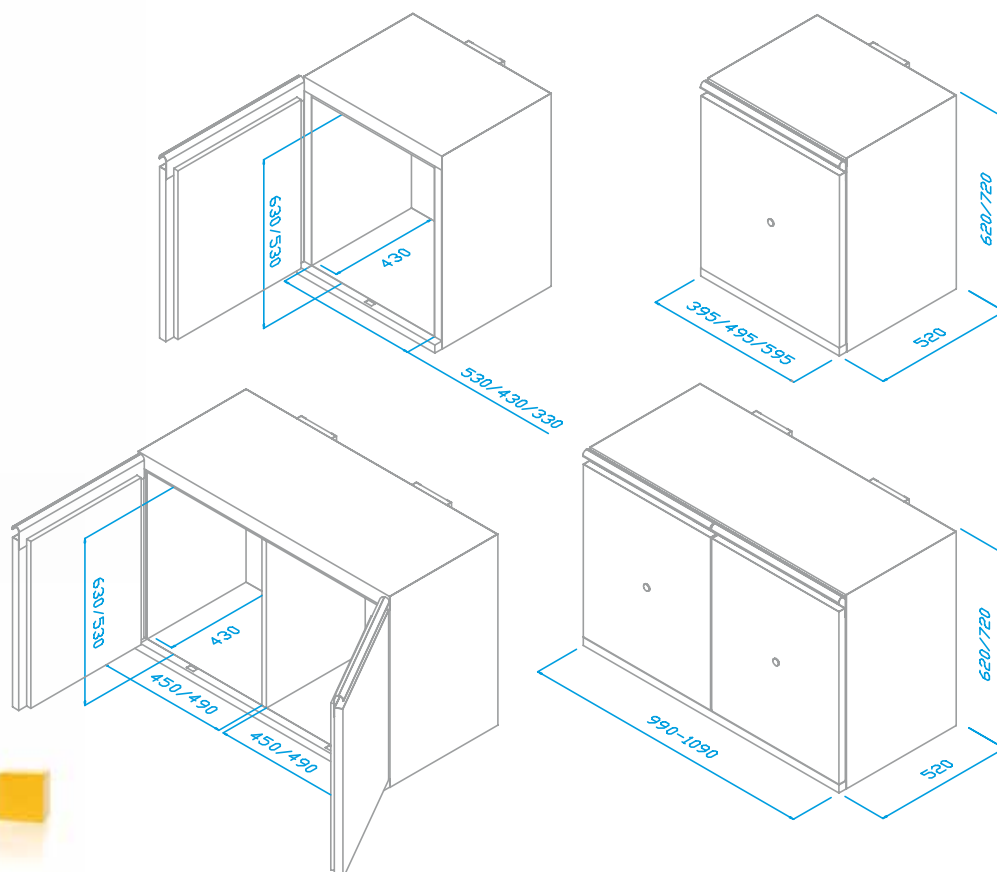

## COMBISTORAGE 60 e 120

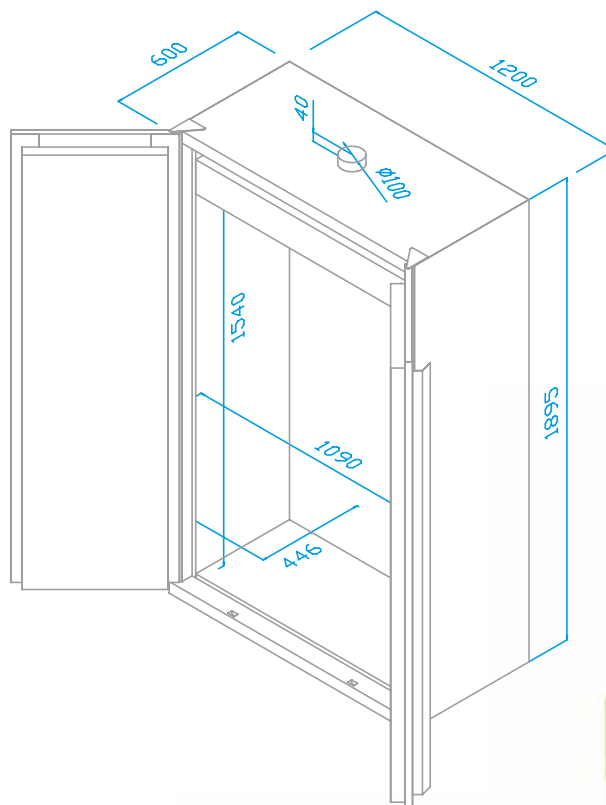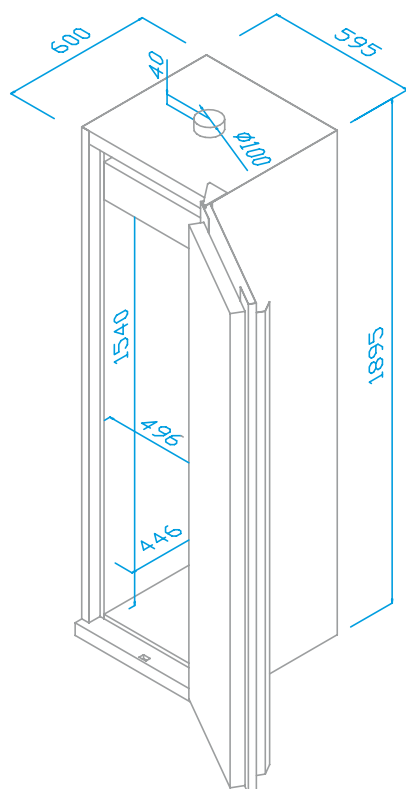

## COMBISTORAGE 2

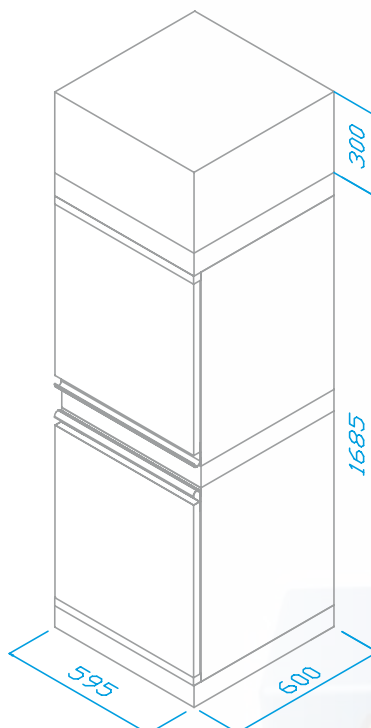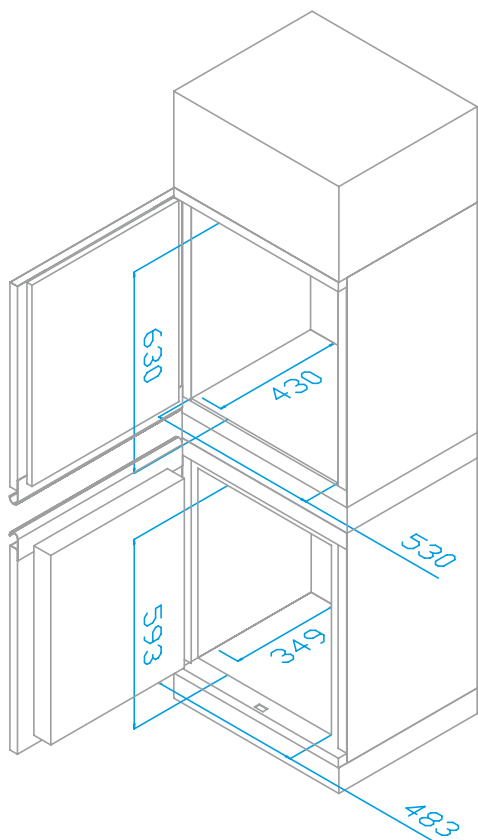

# COMBISTORAGE

ARMADI DI SICUREZZA COMBINATI CERTIFICATI  
PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI PERICOLOSI



Rivenditore autorizzato:

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab**

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: [www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - e-mail: [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)