


# EnSURE™ Touch

EnSURE™ Touch è un bioluminometro di nuova generazione per fornire un supporto rapido e accurato ai programmi di monitoraggio della sanificazione in azienda.

E' dotato di un ampio display touch-screen, tecnologia wireless e un software che permette il salvataggio dei dati in cloud.

Il bioluminometro EnSURE Touch è stato ideato per adattarsi ai luoghi di lavoro, fornendo i dati necessari per il monitoraggio della produzione, l'audit, la gestione del rischio e la prevenzione del richiamo pei prodotti.

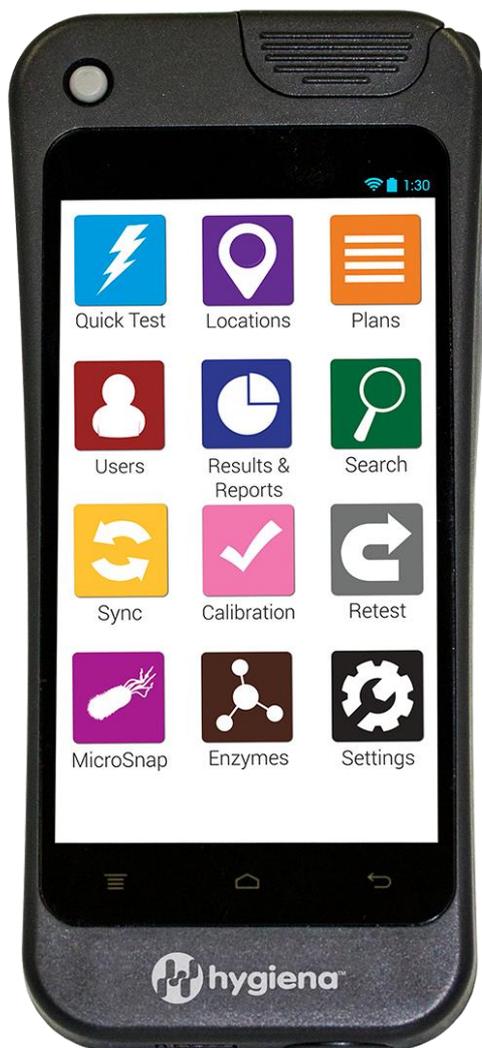

#### Caratteristiche e benefici:

- La tecnologia avanzata dei fotodiodi, la chimica combinata con algoritmi unici, rendono l' EnSURE touch il più sensibile e affidabile strumento disponibile sul mercato
- Non è necessaria una calibrazione periodica
- La capacità di comunicazione permette l'intervento da remoto direttamente sullo strumento
- Connettività Wi-Fi o USB al software in Cloud oppure al PC
- Display touch-screen ad alta sensibilità per l'utilizzo anche con i guanti
- Configurazione e funzionamento simile ad uno smartphone
- Possibilità di selezionare i range di misura anche degli strumenti concorrenti al fine di confrontare i dati ottenuti
- Possibilità di configurare lo strumento per ridurre il consumo della batteria
- Sistema di segnalazione in caso di malfunzionamento del sensore



**Test rapidi:** Si effettua un test da ogni piano di campionamento o punto prescelto in meno di due tocchi



**Piani di campionamento:** Si può agevolmente raggruppare i punti da testare in piani di campionamento



**Utilizzatori:** Si può differenziare l'accessibilità dello strumento a diversi livelli di permissività



**Ricerca:** Si possono facilmente ritrovare i test effettuati sia indicando il punto che la data



**Punti:** Si possono memorizzare i punti da testare salvandoli con i relativi limiti, senza dover accedere al PC



**Re-test:** Si possono ri-testare i punti con risultato negativo, conservandone il risultato



**Risultati e report:** Si visualizzano facilmente i risultati e il trend d'analisi



**Impostazioni:** Si possono agevolmente modificare le impostazioni di lingua, carattere, scala di misura e contatti di riferimento



**Sincronizzazione:** i dati vengono salvati in cloud via wireless mediante il software SureTrend Cloud



**Calibrazione:** Gli strumenti sono pre-calibrati ed esiste uno strumento per valutare che la lettura sia sempre nei parametri indicati



**MicroSnap:** Si possono effettuare i test per i microorganismi Coliformi, E.Coli Enterobatteriaceae e Carica Batterica Totale



**Enzimi:** Si possono effettuare i test per la Fosfatasi Alcalina e la Fosfatasi Acida (nel latte)

## EnSURE Touch ti può aiutare

- Verifica il livello igienico delle superfici, dei liquidi e dei prodotti in soli 15 secondi
- Verifica e confronta l'efficienza dei Prodotti di sanificazione e delle procedure adottate
- Supporta gli addetti del controllo qualità e fornisce una prova oggettiva che gli standard di pulizia sono stati raggiunti
- Evidenzia velocemente quando delle parti di ricambio come spazzole o nastri debbano essere sostituite
- Identifica le aree a maggior rischio all'interno del proprio ambiente aziendale
- Fornisce informazioni e risposte direttamente sul posto

## Al fine di...

- Soddisfare gli standard richiesti (es. ISO, FSMA e GFSI)
- Proteggere la reputazione del proprio marchio
- Evitare azioni legali economicamente dannose
- Ridurre il rischio di richiamo di prodotti e di chiusure aziendali
- Ridurre i costi di analisi aumentando il monitoraggio interno
- Fornire le prove del proprio operato - HACCP

## Specifiche tecniche:

- Memoria: 2 GB di memoria interna e Spazio in cloud illimitato
- Connettività Wi-Fi
- Batteria: al litio ricaricabile con ricarica tramite cavo USB
- Diverse lingue selezionabili

## Software SureTrend Cloud:

- Interfaccia completamente interattiva
- Si possono agevolmente configurare diversi strumenti con un solo account
- Possibilità di monitorare i test attraverso diversi supporti informatici
- Organizzare dei report automatici che vengano recapitati direttamente nella propria casella di posta



## Per ordinare:

Cod. ENTOUCH Bioluminometro EnSURE Touch complete di software SureTrend Cloud

## Tamponi compatibili:

Cod. US2020 Tamponi Ultrasnap cf. 100 pz

Cod. AQ100X Tamponi Aqusnap total cf. 100 pz

Cod. AQ100F Tamponi Aqusnap free cf. 100 pz

Cod. SUS300 Tamponi Supersnap cf. 100 pz

## Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova

Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143

[www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)