

AUTOCLAVI DA PAVIMENTO

Autoclavi da 24 lt per semplici utilizzi



Autoclave a caricamento verticale per applicazioni di routine



Cicli di sterilizzazione:

- 4 cicli preimpostati: cicli a 121°C - 135°C per liquidi e soliti non imbustati
- 1 ciclo personalizzabile



Valvola di sicurezza a pressione impostata a 3 bar

Protezione dal surriscaldamento

Monitoraggio temperatura

Protezione da sovratensione e corto circuiti elettrici

Protezione da dispersione elettrica

Coperchio e involucro isolati termicamente

Segnalazione di allarme

Dispositivo di sicurezza: blocco meccanico da inserire prima dell'avvio del ciclo



Il microcomputer del sistema permette di controllare il processo di sterilizzazione.

Il monitoraggio del vapore saturo crea un ambiente di sterilizzazione e scarica il vapore.



La stampante inclusa rileva i parametri di tempo, pressione, temperatura, n° serie dell'autoclave, programma selezionato, conteggi progressivi dei cicli, data, mese, anno.

Riempimento manuale dell'acqua




ATV 80

Dati tecnici	ATV 80	
Capacità	lt	24
Acqua da caricare	Demineralizzata o distillata	
Dimensioni (LxPxH)	mm	500x450x950
Dimensioni della camera (Dia*H)	mm	243x500
Materiale della camera	AISI 304 Stainless steel	
Potenza nominale	W	2500
Cestello in acciaio inox (Dia*H)	mm	240x430
Ambiente di lavoro	5-45°C, umidità relativa 10-85%	
Temperatura di sterilizzazione	°C	100-136
Range di tempo della sterilizzazione	min	1-99
Tipologia apertura porta	Sollevare (su e giù)	
Valore massimo della pressione di lavoro	Mpa	2,2
Peso	Kg	60
Codice	608.1000.80	

V/HZ 220-240/50-60



ACCESSORI

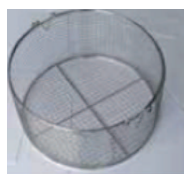

Cestello in acciaio inossidabile

Dimensione Φ 240xH430 mm

Codice 608.1000.82

ACCESSORI OPZIONALI

Steriscan

Nastro per il controllo di avvenuta sterilizzazione (conf.250)

Codice 608.1000.05

RICAMBI

Carta per stampante. Confezione indivisibile 10 pz

Codice 608.1000.84

CARTA VERDE PER STERILIZZAZIONE

Codice	Dimensione mm	Confezione
118.6180.10	500x500	500
118.6180.11 K	750x750	250
118.6180.12 K	1000x1000	250

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it