

PVC Line



Massima resistenza agli acidi, zero corrosione

PVC LINE è dedicata allo stoccaggio sicuro di acidi e sostanze altamente corrosive, grazie alla costruzione interamente in PVC ad alta densità (HD-PVC), materiale che garantisce massima resistenza chimica e meccanica anche in presenza di reagenti estremamente aggressivi. La struttura monolitica, priva di componenti metallici, assicura una totale protezione contro la corrosione e una lunga durata anche in ambienti ad alta umidità o in prossimità di zone di lavaggio.

Le giunzioni termosaldate e le superfici lisce facilitano la pulizia e riducono al minimo il rischio di contaminazione, mantenendo elevati standard di igiene e sicurezza. Gli armadi della linea PVC LINE possono essere dotati di sistemi di ventilazione o aspirazione per il controllo dei vapori acidi, e dispongono di ripiani e vasche di raccolta integrati in materiale anticorrosione.

Le porte a battente, complete di chiusura di sicurezza, garantiscono un accesso comodo e protetto ai contenitori chimici.

PVC LINE è indicato per laboratori chimici, impianti galvanici, industrie farmaceutiche e ambienti di ricerca che richiedono un livello superiore di resistenza agli acidi forti e ai reagenti aggressivi, unendo durabilità, sicurezza e facilità di manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completamente realizzato con uno spessore di 18 mm in PVC HD
- Copertura aspiratore e zoccolo completamente realizzati in lamiera di acciaio spessore 1,0 mm, pressata a freddo, con rivestimento epossidico con polveri epossidiche resistenti agli acidi applicate elettrostaticamente ad una temperatura di 200 °C, che garantisce uno spessore dello strato superiore a 90 micron su tutta la superficie dell'armadio
- Struttura monoscocca costruita su un basamento di 15/10 mm con piedini regolabili di livellamento
- Divisione in 2 scomparti per conservare separatamente le diverse famiglie di prodotti chimici non infiammabili
- Ante semplici a battente incernierate
- Serratura a chiave
- Maniglia a sinistra
- Apertura dell'anta con un angolo di 110° che consente di estrarre i ripiani senza inclinarli
- Cerniera esterna in plastica resistente alla corrosione
- Compartimenti dotati di ripiani di contenimento realizzati in PVC regolabili in altezza
- Collare di connessione Ø 125 mm
- Disponibile con o senza unità di aspirazione
- Soluzioni modulari
- Ripiani a vaschetta
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Rispondente alla norma EN 61010-1

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143

www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**




CS102PVC



CS104BPVC



CS105PVC

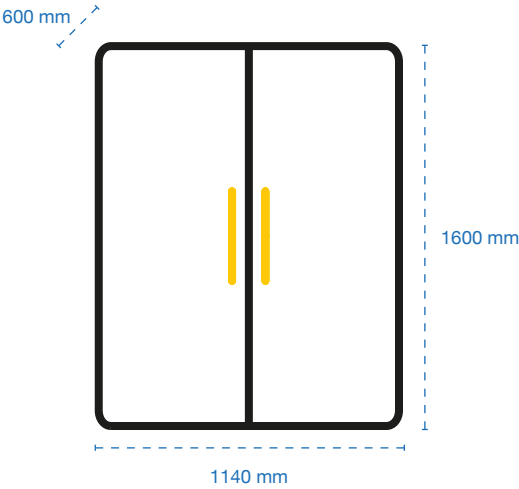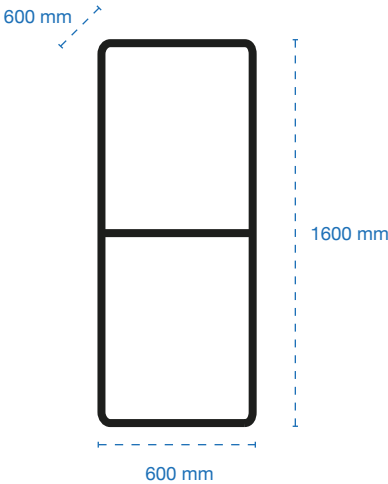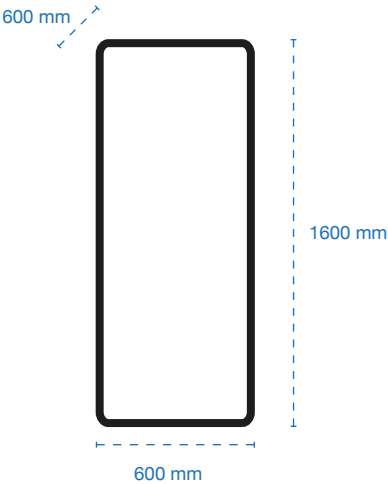

SMART CHOICE:

Ideale per conservare prodotti chimici molto aggressivi.

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
CS102PVC	CS 60 BASIC PVC	600x600x1600	562x562x1470	3 ripiani in PVC	75	77
CS104BPVC	CS 60 A+B BASIC PVC	600x600x1600	562x562x1470	Acidi: 2 ripiani in PVC Basi: 2 ripiani in PVC	100	78
CS105PVC	CS 120 BASIC PVC	1140x600x1600	1102x562x1470	Acidi: 3 ripiani in PVC Basi: 3 ripiani in PVC	150	87

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
RIP60WPVC	Ripiano in PVC per armadio da 60	550xx525x30	35	3
RIP120WPVC	Ripiano in PVC per armadio da 120	535x525x30	35	3
TIM24	Timer giornaliero	-	-	-
ALLARME	Sistema di allarme “porte aperte”	-	-	-

VENTILAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
2CP104	Sistema di aspirazione per armadio da 60	600x600x300
2CP106	Sistema di aspirazione per armadio da 120	1140x600x300
DIAM125BPCE	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro, con controllo velocità, portata e contaore – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all’esterno)	290x290x270
DIAM125BP	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all’esterno)	290x290x270
RSOLCA	Filtro a carboni attivi per acidi (consigliabile sostituirlo almeno una volta all’anno)	235x110x15
GFKIT125	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 125mm e 2 morsetti)	Ø 125 mm L 1000 mm
CFNCE	Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211 con controllo velocità, portata e contaore (filtro non incluso)	570x500x250
CFNL	Sistema di aspirazione molecolare senza allarme (filtro non incluso)	570x500x250
CSBE	Filtro a carboni attivi per acidi, prefiltro incluso (consigliabile sostituirlo almeno una volta all’anno)	510x400x60
CSPF	Prefiltro (presente in tutti i filtri)	510x400x15
RFCS60	Filtro per armadio da 60	290x235x16
RFCS60F	Filtro formalina per armadio da 60	290x235x16
RFCS120	Filtro per armadio da 120	580x235x16
RFCS120F	Filtro formalina per armadio da 120	580x235x16
CS0500M	Allarme elettronico mancanza aspirazione	-

PVC ASPIRATO EN61010-1, CEI66-5 e EN16121



CS103PVC



CS104PVC



CS106PVC

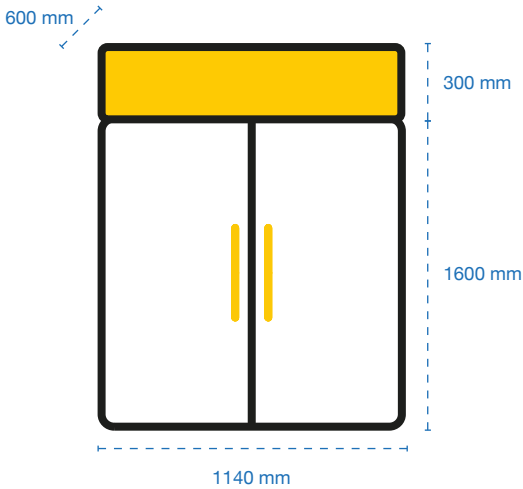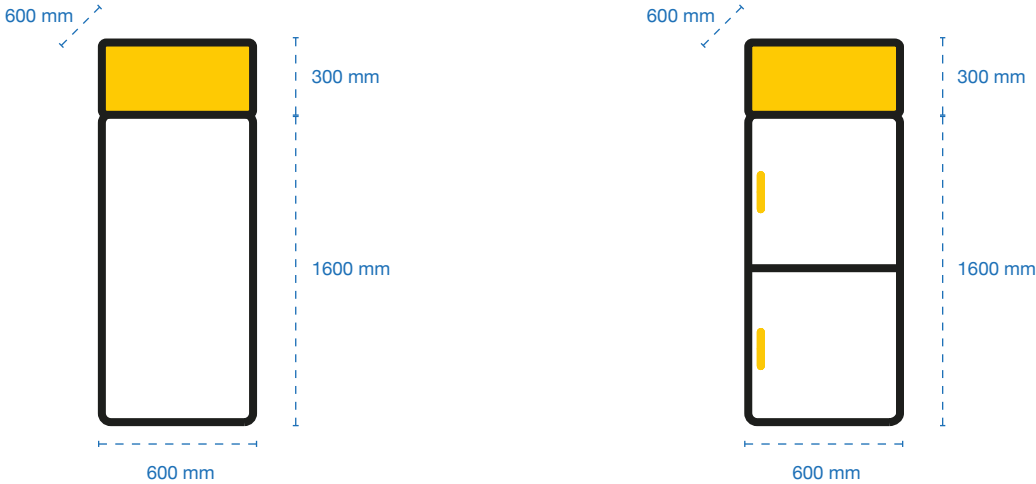

SMART CHOICE:

Ideale per conservare prodotti chimici molto aggressivi.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
CS103PVC	CS 60 PVC	600x600x1900 (1600+300)	562x562x1470	3 ripiani in PVC	75	85
CS104PVC	CS 60 A+B PVC	600x600x1900 (1600+300)	550x550x1470	Acidi: 2 ripiani in PVC Basi: 2 ripiani in PVC	100	86
CS106PVC	CS 120 PVC	1140x600x1900 (1600+300)	1102x562x1470	Acidi: 3 ripiani in PVC Basi: 3 ripiani in PVC	150	99

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
RIP60WPVC	Ripiano in PVC per armadio da 60	550xx525x30	35	3
RIP120WPVC	Ripiano in PVC per armadio da 120	535x525x30	35	3
TIM24	Timer giornaliero	-	-	-

ALLARME	Sistema di allarme “porte aperte”	-	-	-
---------	-----------------------------------	---	---	---

VENTILAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CE1250	Controller con display touch allarme, portata, velocità, stato filtri	-
CS0500M	Allarme elettronico mancanza aspirazione	-
GFKIT125	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 125mm e 2 morsetti)	Ø 125 mm L 1000 mm
RFCS60	Filtro per armadio da 60	290x235x16
RFCS120	Filtro per armadio da 120	580x235x16
RFCS60F	Filtro formalina per armadio da 60	290x235x16
RFCS120F	Filtro formalina per armadio da 120	580x235x16
LIN125	Motore di ricambio per sistema di aspirazione fino all’anno 2015	-
ACF125	Motore di ricambio per sistema di aspirazione dall’anno 2015	-

PVC UB EN61010-1, CEI66-5 e EN16121

CS101PVC



CS100PVC

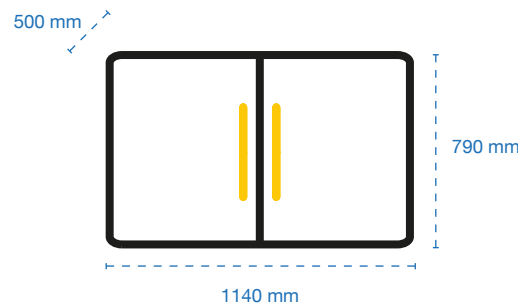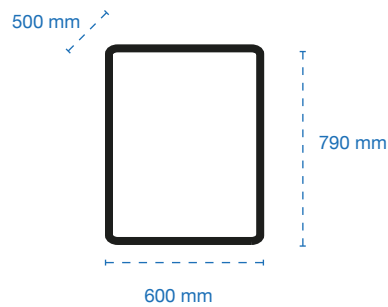

SMART CHOICE:

Ideale per conservare prodotti chimici molto aggressivi.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
CS101PVC	CS 60 UB PVC	600x500x790	562x462x686	2 ripiani in PVC	50	32
CS100PVC	CS 120 UB PVC	1140x500x790	1102x462x686	Acidi: 2 ripiani in PVC Basi: 2 ripiani in PVC	100	43

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
RIP60UBPVC	Ripiano in PVC per armadio da 60 UB	550x430x30	25/30	3
RIP120UBPVC	Ripiano in PVC per armadio da 120 UB	537x430x30	20/30	3
TIM24	Timer giornaliero	-	-	-
ALLARME	Sistema di allarme "porte aperte"	-	-	-

VENTILAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
DIAM125BPCE	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro, con controllo velocità, portata e contaore – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all'esterno)	290x290x270
DIAM125BP	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all'esterno)	290x290x270
RSOLCA	Filtro a carboni attivi per acidi (consigliabile sostituirlo almeno una volta all'anno)	235x110x15
GFKIT100	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 100mm e 2 morsetti)	Ø 100 mm L 1000 mm
GFKIT125	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 125mm e 2 morsetti)	Ø 125 mm L 1000 mm
CFNUBCE	Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211 con controllo velocità, portata e contaore (filtro non incluso), dotata di ruote e 2 prese di ventilazione.	410x570x650
CFNUBL	Sistema di aspirazione senza allarme (filtro non incluso), dotata di ruote e 2 prese di ventilazione.	410x570x650
CSBE	Filtro a carboni attivi per acidi, prefiltro incluso (consigliabile sostituirlo almeno una volta all'anno)	510x400x60
CSPF	Prefiltro (presente in tutti i filtri)	510x400x15