




**PATHO HOOD** ASEM<sup>®</sup>  
CAPPA CHIMICA  
PER ANATOMIA PATOLOGICA



**PATHO HOOD** ASEM®  
LA CAPPА CHIMICA  
DI ULTIMA GENERAZIONE  
PROGETTATA PER  
ANATOMIA PATOLOGICA

**Dall'esperienza decennale di ASEM® nel settore della sicurezza nel laboratorio, nasce PATHO HOOD, la cappa chimica di ultima generazione progettata per anatomie patologica.**

L'importanza, ed il ruolo fondamentale che svolge l'anatomia patologica nel campo medico e chirurgico, necessita di massima sicurezza ed igiene in ogni intervento.

E' fondamentale avvalersi dei giusti strumenti per garantire un'alta qualità del lavoro.

Su questa basi abbiamo sviluppato la cappa chimica che risponda alle sempre più esigenti richieste dal mondo della anatomia patologica.

La particolare apertura a basculante, permette di avvicinarsi fisicamente al campione prelevato in totale sicurezza biologica, in quanto il vetro protegge l'operatore da eventuali schizzi, e con la doppia aspirazione, da vapori e odori dannosi.



La cappa, essendo equipaggiata anche di lavello e servizi idrici, è ideale per pratiche come l'agoaspirazione, il lavaggio, lo spazzolamento e l'esfoliazione, attività principali di un esame istologico intraoperatorio o citologico.






## **PATHO HOOD** ASEM®: PARTICOLARE VETRO FRONTALE DOTATO DI SALISCENDI CON DISPOSITIVO **HIGH-VISION**

La doppia cornice incernierata e controllata da pistoncini, permette di orientare i vetri verso l'interno della camera di aspirazione ampliando la visibilità e facilitando notevolmente la manipolazione di campioni.

È altrettanto possibile regolare l'apertura a seconda dell'altezza dell'operatore; sia in piedi che seduto.

Questa disposizione garantisce la massima sicurezza per l'operatore, protezione da schizzi (rischio biologico) ed ottimizzazione dei flussi d'aria con contenimento dei vapori.





LA **SICUREZZA**  
DURANTE LE OPERAZIONI  
IN LABORATORIO  
SONO LA BASE  
DEL LAVORO DI SUCCESSO

**La ricerca e sviluppo costante di ASEM® e una meticolosa sensibilità alla sicurezza, ci hanno permesso di creare la più efficace Cappa chimica per anatomia patologica.**

**PATHO HOOD**, grazie alla sua scocca completamente chiusa e con doppia aspirazione, abbatte completamente la possibilità di far fuoriuscire vapori e odori dannosi per gli utenti all'interno del laboratorio, mantenendo l'ambiente salubre.

Lo schermo protettivo brevettato con apertura a basculante **high-vision**, inoltre, darà la possibilità di avvicinarsi ai campioni lavorati sotto cappa, evitando il contatto con pericolosi schizzi di materiale biologico. Basterà infatti semplicemente applicare pressione sulla parte centrale del saliscendi per avere più spazio utile per analizzare campioni, e poterne apprezzare eventuali qualità più da vicino.

Grazie a questo brevetto garantiamo un utilizzo versatile e più performante per gli utenti, ed anche maggior igiene e sicurezza all'interno dell'ambiente lavorativo.



# PATHO HOOD ASEM®

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX



VETRO HIGH-VISION

PIANO IN ACCIAIO INOX AISI 316

AREA LAVAGGIO

DISPENSER CARTA



ALLARME FLUSSO ARIA LED





Vasca INOX  
Rubinetti H<sub>2</sub>O  
Dispenser formalina  
Sistema di scarico controllato



Il piano di lavoro è completamente in Acciaio INOX AISI 316, dotato di bordi perimetrali anti debordanti. La superficie continua è perfettamente liscia con una porzione forata dedicata all'aspirazione di vapori pesanti.

Questa particolare lavorazione, si ottiene con il procedimento **ARGON**, che garantisce l'assoluta mancanza di porosità mediante stampaggio e saldatura eseguita elettricamente in atmosfera di gas inerte.

La superficie superiore del top di lavoro finemente satinata, oppure lavorata con procedimento definito **SCOTCHBRITE**, consente di ottenere una microporosità simile alla lucidatura a specchio, ideale per evitare formazioni di colonie di batteri l'aggressione di agenti chimici.


Le sezioni sono asportabili al fine di una facile pulizia.  
È possibile pulire anche con il getto d'acqua sottopiano.



# PATHO HOOD

 **ASEM**® Fume Cabinet  
CEEN 14175-2-3-4-5-6-7



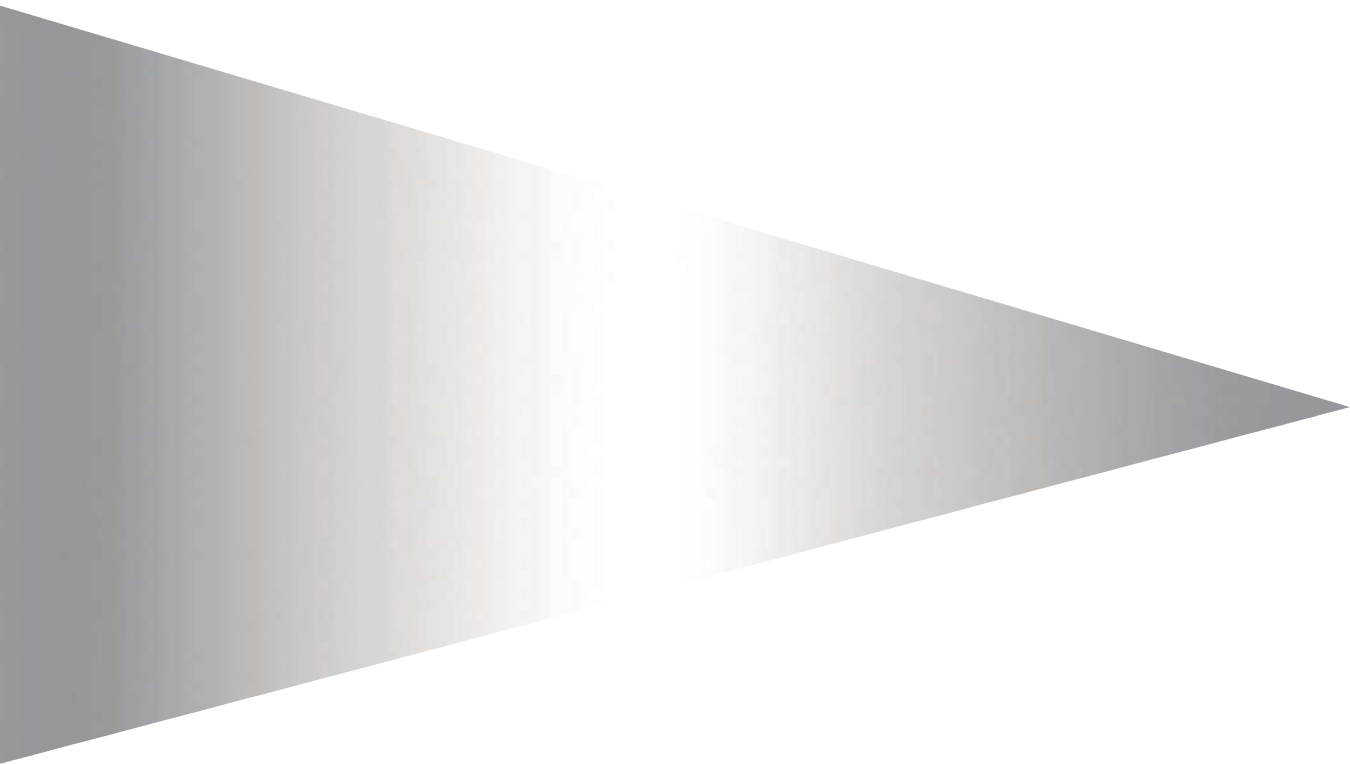

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
[www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)

**Zetalab.it**  
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**

