


CORROTEST-T

Salt Spray Chamber

File: Camera-T.docx

Camera di Corrosione in Nebbia Salina

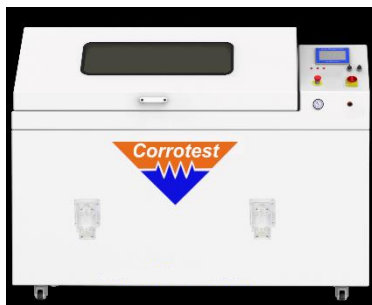

Le **Camere di Corrosione in Nebbia Salina modello CORROTEST-T** per l'esecuzione di test in accordo alle **norme ASTM B117, ISO 9227, NSS, ASS e CASS test**. L'intuitivo controllo Touch-Screen e i diversi volumi disponibili rendono queste camere adatte ad una vasta gamma di prove.

Caratteristiche:

Camera di lavoro in fibra di vetro rivestita in materiale plastico resistente alla corrosione.

Coperchio con apertura verso l'alto e finestra d'ispezione (solo per il modello T01 il coperchio è completamente trasparente).

Ruote con freno per una facile movimentazione e posizionamento.

Elementi riscaldanti ad alta efficienza posizionati sul fondo della camera.

Sistema di nebulizzazione a torretta con altezza e volume di nebulizzazione regolabile, resistente alle alte temperature e alla corrosione e **ugelli** in quarzo facili da pulire.

Serbatoio soluzione con sistema automatico di agitazione.

Saturatore aria con protezione livello acqua basso: in mancanza di acqua il saturatore smette di funzionare e non viene prodotta nebbia.

Sistema di controllo con Touch-Screen a colori con visualizzazione di tutti i parametri.

Porta USB per scarico dati.

Porta Ethernet per connessione a LAN o PC.

Sonda di temperatura PT100.

Dispositivi di Sicurezza:

Protezione sovratemperatura


Protezione livello acqua basso

Protezione magnetotermica

CORROTEST-T

Salt Spray Chamber

File: Corrotest-T.docx

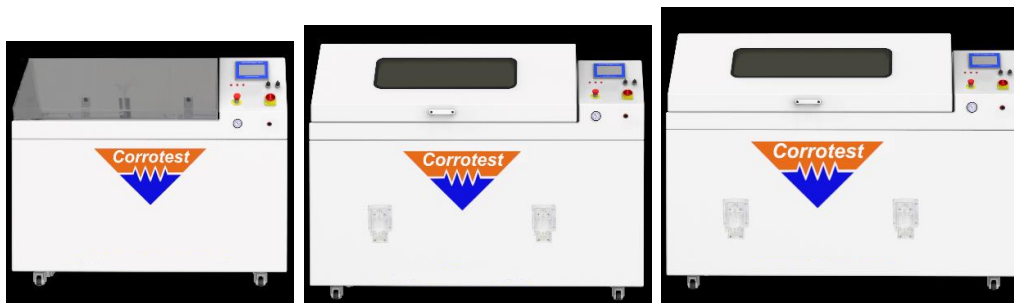

Codice	Corrotest-T01	Corrotest-T02	Corrotest-T03	Code
Volume L	110	320	410	Volume L
Dim.Interne LxPxH mm	590x470x400	1000x640x500	1100x750x500	Internal Dim. WxDxH mm
Mis.Esterne LxPxH mm	1460X760X1140	1850X960X1350	1950X1030X1350	External Dim. WxDxH mm
Sistema di Controllo	Color Touch Screen	Color Touch Screen	Color Touch Screen	Control System
Uscita USB	Yes	Yes	Yes	USB Port
Uscita Ethernet	Yes	Yes	Yes	Ethernet Connection
Campo di Temperatura	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	Temperature Range
Temperatura Saturatore	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	Saturated Barrel Temp. Range
Precisione Temperatura	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	Temperature Fluctuation
Uniformità Temperatura	± 2,0°C	± 2,0°C	± 2,0°C	Temperature Deviation
Pressione di Nebulizzazione	83KPA	83KPA	83KPA	Spray pressure
Precipitato	1-2 ml/80cm2/h	1-2 ml/80cm2/h	1-2 ml/80cm2/h	Salt Fog Deposition
Controllo UR%	#	#	#	RH% Control
Precisione UR%	#	#	#	Humidity Deviation
Controllo SO ₂	#	#	#	SO ₂ Control
Sostegni per provini	Yes	Yes	Yes	Sample Holders
Imbuti e Cilindri Graduati	Yes	Yes	Yes	Funnels and Measuring Cylinders
Serbatoio con Agitazione	Yes	Yes	Yes	Water Tank with Stir System
Alimentazione	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz	230V 1f 50Hz	Power Supply

Il costruttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto - The manufacturer reserves the right to change the design and the features of the products.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143

www.zetalab.it - info@zetalab.it


Zetalab.it

Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**

CORROTEST-T

Salt Spray Chamber

File: Corrotest-T.docx

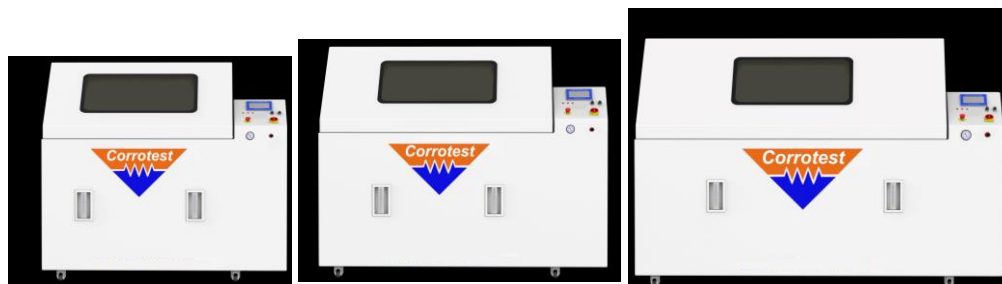

Codice	Corrotest-T04	Corrotest-T05	Corrotest-T06	Code
Volume L	780	1280	1600	Volume L
Dim.Interne LxPxH mm	1300x1000x600	1600x1000x800	2000x1000x800	Internal Dim. WxDxH mm
Mis.Esterne LxPxH mm	1860x1300x1600	2160x1300x1720	2700x1300x1900	External Dim. WxDxH mm
Sistema di Controllo	Color Touch Screen	Color Touch Screen	Color Touch Screen	Control System
Uscita USB	Yes	Yes	Yes	USB Port
Uscita Ethernet	Yes	Yes	Yes	Ethernet Connection
Campo di Temperatura	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	Temperature Range
Temperatura Saturatore	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	T.Amb. ÷ +60°C	Saturated Barrel Temp. Range
Precisione Temperatura	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	Temperature Fluctuation
Uniformità Temperatura	± 2,0°C	± 2,0°C	± 2,0°C	Temperature Deviation
Pressione di Nebulizzazione	83KPA	83KPA	83KPA	Spray pressure
Precipitato	1-2 ml/80cm2/h	1-2 ml/80cm2/h	1-2 ml/80cm2/h	Salt Fog Deposition
Controllo UR%	#	#	#	RH% Control
Precisione UR%	#	#	#	Humidity Deviation
Controllo SO ₂	#	#	#	SO ₂ Control
Sostegni per provini	Yes	Yes	Yes	Sample Holders
Imbuti e Cilindri Graduati	Yes	Yes	Yes	Funnels and Measuring Cylinders
Serbatoio con Agitazione	Yes	Yes	Yes	Water Tank with Stir System
Alimentazione	400V 3f 50Hz	400V 3f 50Hz	400V 3f 50Hz	Power Supply

Il costruttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto - The manufacturer reserves the right to change the design and the features of the products.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143

www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it

Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**