


## Isolatori linea SGS


Dedicati alle manipolazioni di Citotossici e CMR

### Caratteristiche Generali

- *Protezione degli Operatori*
- *Protezione dell'Ambiente*
- *Manipolazione di sostanze citotossiche*
- *Manipolazione di CMR*
- *Pesate e Frazionamento in sicurezza*
- *Trattamento di materiali igroscopici*

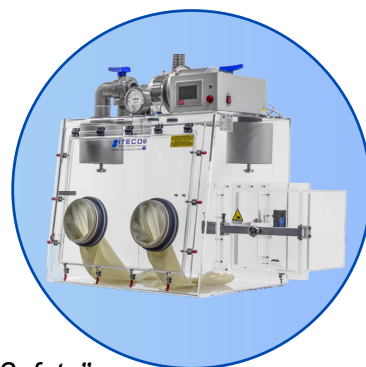

SGS202 "Safety"

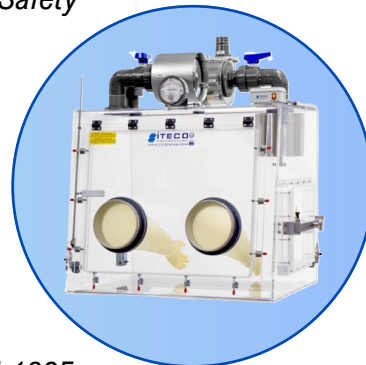

SGS-EL 102F

Frutto di uno studio accurato della configurazione e dell'ergonomia, questi sistemi permettono di operare con totale sicurezza e nella massima semplicità.

La disponibilità di numerosi accessori li rende perfettamente adattabili alle diverse esigenze produttive della Farmacia

MADE IN ITALY



## Scheda Tecnica

- *Struttura completamente in PMMA (acrilico)*
- *Parete frontale inclinata e completamente apribile, dotata di due flange con guanti*
- *Precamera prismatica (\*)*
- *Aspiratore centrifugo*
- *Filtri Hepa (H14) in ingresso e uscita*
- *Doppio filtro in uscita*
- *Allarme per calo depressione (\*)*
- *Valvola di sovrappressione*
- *Manometro per il controllo della pressione interna*
- *Connessione per fluidi*
- *Passaggio cavi*
- *Pannello di controllo PLC con touch screen a colori (\*)*

*(\*) Queste caratteristiche presenti nel modello SGS202 "Safety", aumentano il grado di protezione per l'operatore e per l'ambiente e permettono la manipolazione di citotossici.*

| Dati tecnici                                                             |                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                                          | Modello SGS-EL102F                  | Modello SGS202 "Safety" |
| Dimensioni utili Camera di lavoro l x p x h (mm)                         | 900x650x750                         | 900x650x750             |
| Dimensioni utili Precamera l x p x h (mm)                                | No precamera, portello<br>300x300mm | 350x300x300             |
| Dimensioni esterne l x p x h (mm)                                        | 900x650x750                         | 1300x650x750            |
| Peso (Kg)                                                                | 55                                  | 80                      |
| Alimentazione                                                            | 230 Vca 50-60Hz                     | 230 Vca 50-60Hz         |
| Potenza massima richiesta<br>(senza utenze collegate alla presa interna) | 900W                                | 1500W                   |

*Le glove boxes di questa linea sono conformi agli standard:*

*ISO 10648-1 - ISO 10648-2 Camere di contenimento – Parte 1: Principi di progettazione Parte 2: Classificazione in base alla tenuta e metodi di controllo associati.*

*ISO 14644-7 Camere bianche e relativi ambienti a contaminazione controllata – Parte 7: dispositivi di isolamento (glove box, isolatori e mini-ambienti).*

MADE IN ITALY

