

**CHEMISAFE®**  
SAFETY STORAGE CABINETS

**FIRE BOMB** ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI  
PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESSI





B 60 G 30

B 120 G 30

## ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER BOMBOLE GAS COMPRESSE PER INTERNI



Costruiti completamente in lamiera di acciaio decappato con spessori 1 - 1,5 mm pressopiegata a freddo verniciata con polveri epossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Struttura con rivestimenti smontabili in caso di danneggiamento.

Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (**essente da Fibrocaramica**) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio.

Doppia scocca interna con pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-2.

- FERMABOMBOLE.
- CHIUSURA DI SICUREZZA CON CHIAVE.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (68 °C) dei condotti di uscita dell'aria, **essente da manutenzione**, posti sul cielo armadio, ingresso nella parte bassa per l'estrazione dei vapori/gas pesanti.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante (DIN 4102).
- PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO TUBAZIONI.
- RAMPA IN LAMIERA RICHIUDIBILE PER UNA FACILE SOSTITUZIONE BOMBOLE.
- POSSIBILITÀ DI RIPIANI REGOLABILI PER PICCOLE BOMBOLE (1 compreso).



## ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI GAS PER INTERNO



**B 120 X G 90**  
SEPARAZIONE  
COMBURENTI  
COMBUSTIBILI



**B 60 X G 90**

CODICE	G MINUTI	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm	DIMENSIONI INTERNE L x P x A mm	N° BOMBOLE	PESO Kg
<b>B 60 G 30</b>	30	ARMADIO B 60 G 30	595 x 600 x 2050	445 x 420 x 1760	1 - 2	245
<b>B 120 G 30</b>	30	ARMADIO B 120 G 30	1200 x 600 x 2050	1050 x 420 x 1760	3 - 4	420
<b>B 60 X G 90</b>	90	ARMADIO B 60 G 90	595 x 600 x 2050	445 x 420 x 1760	1 - 2	260
<b>B 120 X G 90</b>	90	ARMADIO B 120 G 90 SEPARAZIONE COMBURENTI/COMBUSTIBILI	1200 x 600 x 2050	445 + 445 x 420 x 1760	(1 - 2) + (1 - 2)	520


## PANDESA® DEPOSITO PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GAS

### DEPOSITO BOMBOLE GAS COMPRESSI CERTIFICATO.

#### Autorizzazione del Ministero degli Interni. Certificato n° 3804/30/91.


Costruzione con pannelli in acciaio incartato e saldato a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura, completi di piedi regolabili per fissaggio al suolo su basamento in cemento; possibilità di riempire detti pannelli, con sabbia o calcestruzzo, quindi fissati.

- Predisposizione alla modularità.
- Completo di sistema di messa terra continua per singolo pezzo (GABBIA DI FARADAY).
- Foratura per fissaggio moduli.
- Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato fissato su base portante in acciaio verniciato.
- Gronda in PVC.
- Ante con rete antintrusione complete di chiusura di sicurezza.
- Trattamento di zincatura su tutti i componenti.
- Verniciatura con resine poliuretaniche autoestinguenti.
- Possibilità di separare combustibili da comburenti.
- Non necessita di licenza edilizia.
- Varie possibili combinazioni (nella foto il 3 posti bombola).

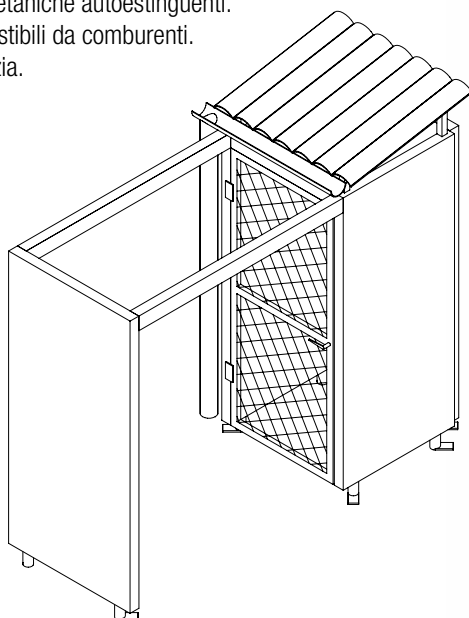


### KIT PROTEZIONE PORTE


CODICE	N° PORTE
KPAN01	1 PORTA
KPAN02	2 PORTE

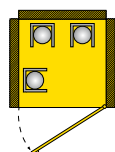


**PAN 01**  
**PANDESA 3 posti**  
L 960 x P 880 x A 2400 mm  
Peso: 262 Kg

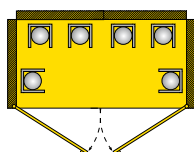


**PAN 02**  
**PANDESA 6 posti**  
L 1760 x P 880 x A 2400 mm  
Peso: 377 Kg

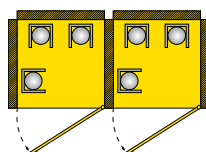


**PAN 03**  
**PANDESA 3+3 posti**  
L 1840 x P 880 x A 2400 mm  
Peso: 448 Kg

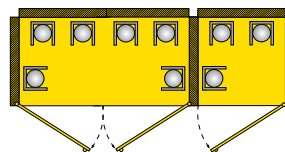


**PAN 04**  
**PANDESA 6+3 posti**  
L 2640 x P 880 x A 2400 mm  
Peso: 568 Kg

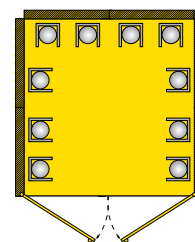


**PAN 05**  
**PANDESA 10 posti**  
L 1760 x P 1680 x A 2400 mm  
Peso: 550 Kg

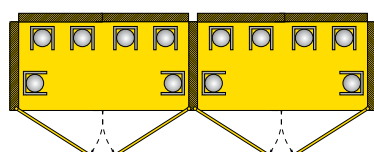

**PAN 06**  
**PANDESA 6+6 posti**  
L 3440 x P 880 x A 2400 mm  
Peso: 683 Kg

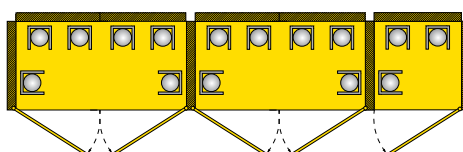

**PAN 07**  
**PANDESA 6+6+3 posti**  
L 4320 x P 880 x A 2400 mm  
Peso: 875 Kg

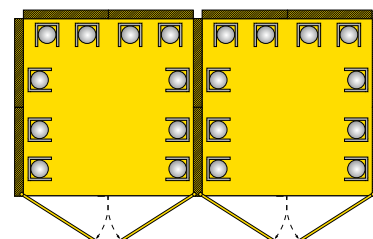

**PAN 08**  
**PANDESA 10+10 posti**  
L 3440 x P 1680 x A 2400 mm  
Peso: 909 Kg


## DEPOSITO PER STOCCAGGIO BOMBOLE ESTERNO



- Porte a battente con chiusura antintrusione.
- Tettuccio zincato.
- Basamento interno in acciaio mandorlato.
- Aggancio bombole interno con catena e moschettone.
- Predisposto a modularità.
- Etichettatura di sicurezza compresa.




RAMPA CODICE PEDPB

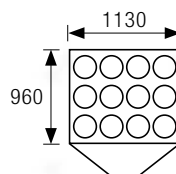


**PBOX912 - 9/12 posti**

Dimensioni esterne: L 1130 x P 960 x A 2100 mm  
Dimensioni interne: L 1065 x P 900 x A 1890 mm  
Peso: 175 Kg

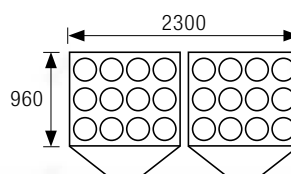

**PBOX1824 - 18/24 posti**

Dimensioni esterne:  
L 2300 x P 960 x A 2100 mm  
Dimensioni interne:  
L 2130 x P 900 x A 1890 mm  
Peso: 350 Kg

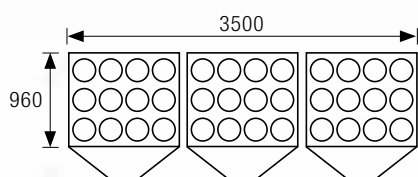

**PBOX2436 - 24/36 posti**

Dimensioni esterne: L 3500 x P 960 x A 2100 mm  
Dimensioni interne: L 3195 x P 900 x A 1890 mm  
Peso: 520 Kg



## ARMADI PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS PER INTERNI ED ESTERNI

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 15 - 10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio.

Porte reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura. Apertura a 110°.

Ante cieche o con finestratura in policarbonato.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di bombole di gas compressi.

RAMPA IN LAMIERA RICHIUDIBILE PER UNA FACILE SOSTITUZIONE BOMBOLE.

CATENELLA FERMA BOMBOLE DA 50 LITRI.

BBASIC120



BBASIC60



## ARMADI PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS PER INTERNI ED ESTERNI

BBASIC120G



BBASIC60G



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm	DIMENSIONI INTERNE L x P x A mm	N° BOMBOLE	PESO Kg
<b>BBASIC60</b>	ARMADIO 1 PORTA CIECA	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	1 - 2	70
<b>BBASIC60G</b>	ARMADIO 1 PORTA PLEXI	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	1 - 2	70
<b>BBASIC120</b>	ARMADIO 2 PORTE CIECHE	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	3 - 4	125
<b>BBASIC120G</b>	ARMADIO 2 PORTE PLEXI	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	3 - 4	125

**CHEMISAFE®**  
SAFETY STORAGE CABINETS

# FIRE BOMB

ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI  
PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESSI



Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab.it**  
strumenti scientifici & laboratorio

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it