

Bagni ad ultrasuoni





Serie LBS 1

L'uso degli ultrasuoni LABSONIC FALC permette una perfetta pulizia degli oggetti in un tempo minimo, ottenendo in pochi secondi l'eliminazione delle impurità più resistenti. Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente. Grazie a questo effetto vibratorio, chiamato cavitazione, si può eliminare dagli oggetti immersi ogni tipo di impurità.

- Massima semplicità d'uso
- Massima potenza
- Timer digitale
- Griglia di appoggio

Dati tecnici		LBS1 -0,6	LBS1 -3	LBS1 -6	LBS1 -10	LBS1 -10,5	LBS1 -15	LBS1 -22,5
Capacità vasca	lt	0,6	3,0	6,0	10,0	10,5	15,0	22,5
Frequenza	KHz	50	50	50	50	50	50	50
Potenza picco	HF/W	39	140	226	280	396	495	700
Potenza assorbita	W	28	100	160	200	280	350	500
Regolazione potenza	%	no	no	no	no	no	no	no
Riscaldamento	°C	no	no	no	no	no	no	no
Timer		no	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞
Scarico del rubinetto		no	no	no	sì	sì	sì	sì
Dim. vasca interna LxPxH	mm	150x86x65	240x140x100	300x150x150	300x240x150	500x140x150	330x300x150	500x300x150
Dim. vasca esterna LxPxH	mm	186x122x155	285x185x215	347x196x270	347x286x278	550x183x300	375x347x293	550x348x308
Peso	kg	2,5	3,2	3,8	5,2	6,0	8,0	10,4
Codice		616.1010.02	616.1010.04	616.1010.06	616.1010.08	616.1010.10	616.1010.12	616.1010.14

ACCESSORI

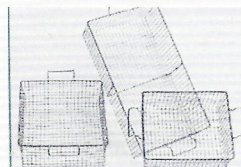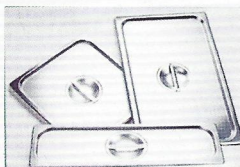

Articolo	LBS1 -0,6	LBS1 -3	LBS1 -6	LBS1 -10	LBS1 -10,5	LBS1 -15	LBS1 -22,5
Coperchio in acciaio	616.1025.02	616.1025.04	616.1025.06	616.1025.08	616.1025.10	616.1025.12	616.1025.14
Cestello in acciaio	-	616.1027.04	616.1027.06	616.1027.08	616.1027.10	616.1027.12	616.1027.14



Flacone da 1 lt concentrato al 10% PH12

Detergente universale per vasche ultrasuoni, adatto per la pulizia di vetrerie, ceramica, metalli e prodotti sintetici, eliminando residui grassi, organici ecc. Biodegradabile al 90%.

Codice

616.1043.45