


Centrifuga multimetodo per test di sedimentazione/solubilità - Astor Multi

Astor Multi è una centrifuga completa e sicura per le applicazioni analitiche tipiche dei settori lattiero-caseario e alimentare, come i metodi Gerber, Mojonnier, Babcock, il test di sedimentazione e usi tradizionali. Il selettore digitale con ampio display permette la programmazione della temperatura, la velocità e la durata della centrifugazione; le impostazioni dei metodi Gerber, Babcock, Mojonnier e del test di sedimentazione sono già allocate in speciali memorie prontamente richiamabili. Un rotore e specifici porta-provette/butirrometri sono disponibili separatamente, per configurare la centrifuga a seconda dell'applicazione desiderata.

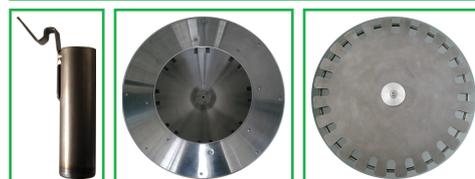

Caratteristiche tecniche:

- ✦ Display digitale con 2 righe alfanumeriche
- ✦ 4 metodi pre-impostati: Gerber, Sedimentazione/Solubilità, Babcock e Mojonnier
- ✦ 1 memoria libera per la programmazione di applicazioni speciali
- ✦ Impostazione di temperatura, velocità (*rpm*) e durata della centrifugazione
- ✦ Ambito di temperatura selezionabile: da temperatura ambiente a 70°C
- ✦ Ambito di velocità selezionabile: da 500 a 1.300 rpm, divisione 1 rpm
- ✦ Ambito di durata selezionabile: da 1 minuto a 9.999 minuti, divisione 1 minuto
- ✦ 2 rotori e 2 tipi di porta-provette/butirrometri disponibili come accessori
- ✦ Dimensioni: 70x60x37 cm (lpxh)
- ✦ Peso: 44 Kg., senza rotore
- ✦ Consumo: 1.500 W

Cod. nr. 60350	Centrifuga Astor Multi, centrifuga multi-metodo, senza rotore e porta-provette
----------------	--

Accessori:

Cod. nr. RT60350GBS	Rotore G/B/S per Gerber, Babcock e provettoni, senza porta-provette, 24 posti
Cod. nr. RT60350M	Rotore M per Mojonnier, senza porta-provette, 8 posti
Cod. nr. PP6035002	Porta-provette/butirrometri G/S in acciaio inox, 1 pezzo (<i>max. 24 per rotore</i>)
Cod. nr. PG6035002	Porta-provette B in acciaio inox, per Babcock, 1 pezzo (<i>max. 24 per rotore</i>)
Codici vari	Altri portaprovette in acciaio inox di varie misure, bottiglie e tappi Babcock e Mojonnier, provette per test di sedimentazione/solubilità, ecc.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it